




WAARDENBURG
MEDICAL

Derungs 
MEDICAL LIGHTING

VISIANO
LED-ONDERZOEKSVERLICHTING



reddot award 2014
winner

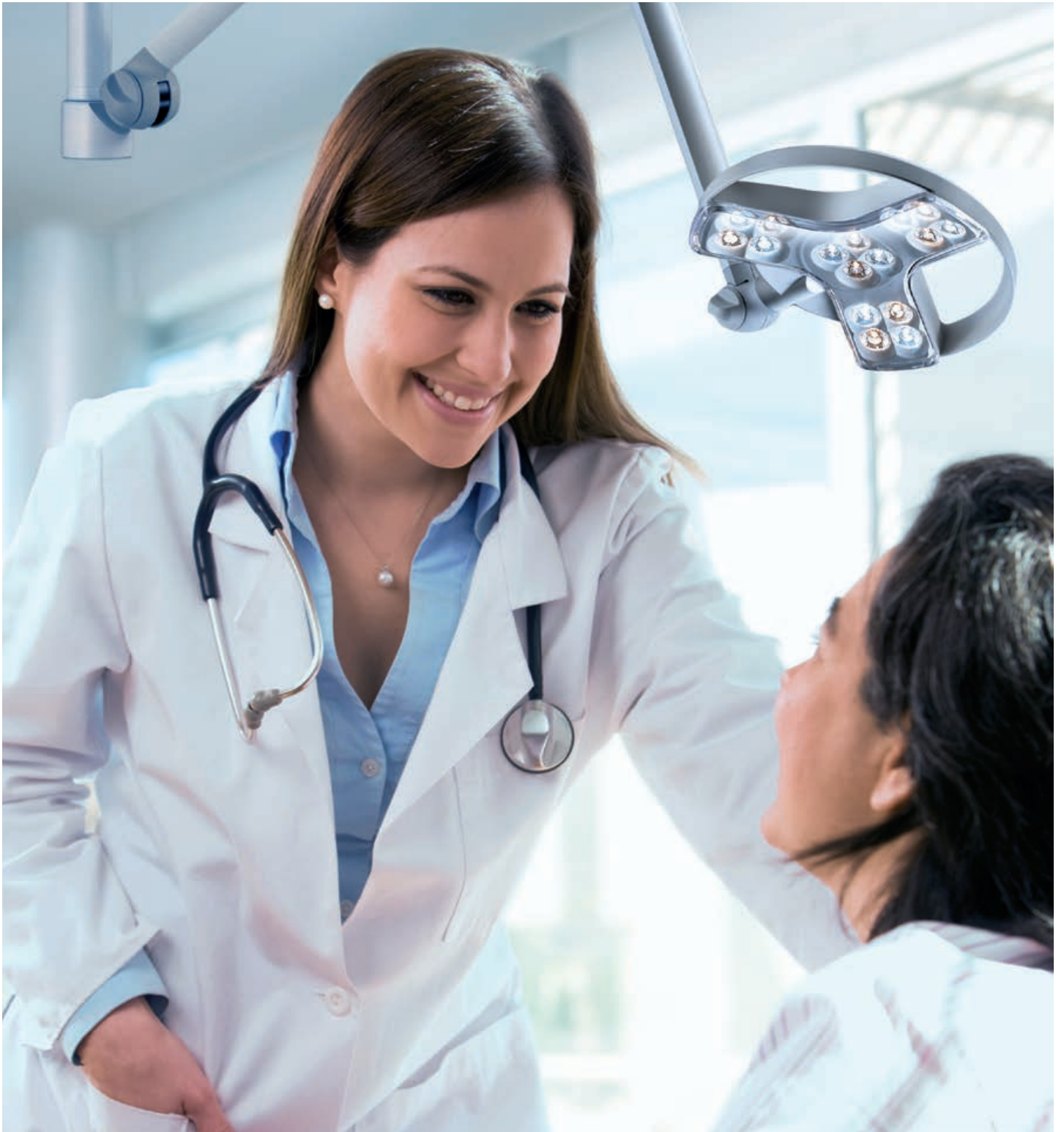

VISIANO ONS MEESTERSTUK

Overal waar aan het zicht de hoogste eisen worden gesteld, is een compromisloze verlichting onontbeerlijk. Of het nu is in de praktijk van een huis- of huidarts, een keel-neus-oorarts of gynaecoloog, of bij extra sensitieve specialismen als neonatologie of intensive care: VISIANO is een echt multitalent. Dankzij het unieke ontwerp, de modernste lichttechniek en de hoogste lichtkwaliteit zorgt het armatuur voor optimale onderzoekscondities.


- de hoogste lichtkwaliteit dankzij de lensvormige armatuurkop, diamantoptiek en premium-LED's, homogeen lichtveld en hoge lichtsterkte, schaduwarm, eerste klas kleurweergave ($R_a > 95$, $R_9 > 90$)
- lange levensduur, veilig en zuinig laag energieverbruik, geïntegreerde converter, onderhoudsvrije behuizing, hoogwaardige aluminium draagdelen en frictiekoppelingen die lang meegaan
- maximale radius en ergonomie 360° draaibare armatuurkop, groot bereik van de arm
- vier dimstappen herhaalbare lichtsterktes, ook voor indirecte omgevingsverlichting bij sensitief werk
- gecontroleerde veiligheid medisch product volgens IEC 60601, uniek in zijn klasse

UNIEKE
DIAMANTOPTIEK
PREMIUM-LED

••••
LED




reddot award 2014
winner

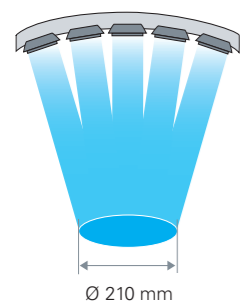

lichtveld
0,5 m – Ø 21 cm

efficient *light*

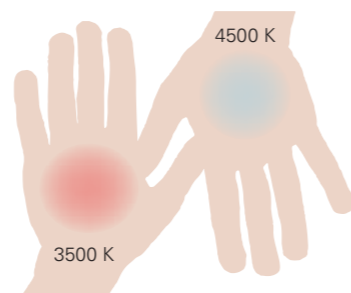

kleurwissel
voor optimaal contrast zien



unieke diamantoptiek
voor de beste kleurhomogeniteit van het licht



360° draaibare-as voor maximale
beschikbaarheid van het licht




veergebalanceerde frictiekoppeling voor
moeiteloos positioneren en vastzetten



Bescherming tegen verspreiding van bacteriën

Op onbehandelde materialen vermenigvuldigen kiemen en bacteriën die gevaar opleveren voor de gezondheid zich binnen 20 minuten. De ingebouwde antimicrobiële Sanitized® hygiënefunctie in de bovenbehuizing van het armatuur, het bedieningsveld en draaiknoppen van de scharnieren helpt deze kritische gebieden hygiënisch te houden. Uit tests is gebleken dat 99% van de bacteriën en microben vernietigd worden. De werking van het biocide is blijvend, maar is geen vervanging voor regelmatige reiniging.

BACTERIËN-REDUCTIE DOOR ZILVERIONEN

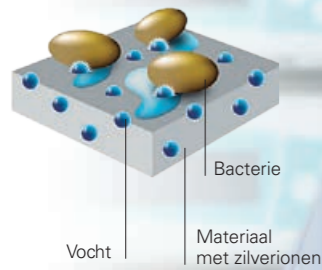

www.sanitized.com

Zilverionen destabiliseren het celmembran van microben en bacteriën


GEZOCHT EN GEVONDEN DE PERFECTE ONDERZOEKSVERLICHTING



Zo veelzijdig als de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe VISIANO zijn ook de te kiezen bevestigingsmogelijkheden, voor aan het plafond, aan de wand of op een verrijdbaar statief. Terwijl u zich door de ergonomische bediening laat overtuigen, verhindert de antimicrobiële Sanitized® hygiënefunctie op betrouwbare wijze de groei van micro-organismen op het oppervlak. Bovendien voorkomt de geheel gesloten behuizing het binnendringen en vasthechten van vuil.

VISIANO in het kort

- intuïtief en ergonomisch
- hoogwaardige componenten
- homogeen lichtveld (Ø 21 cm, 60.000 lx / 0,5 m)
- geïntegreerde antimicrobiële hygiënefunctie
- universele bevestiging
- kleurwissel
- in 4 stappen dimbaar

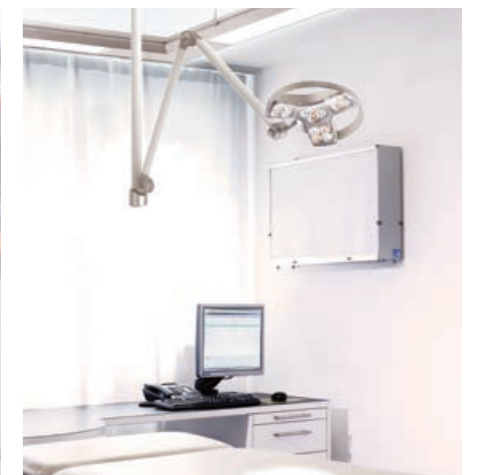


VISIANO



LED



Buis voor
plafondmontage
max 116 mm
te verlengen

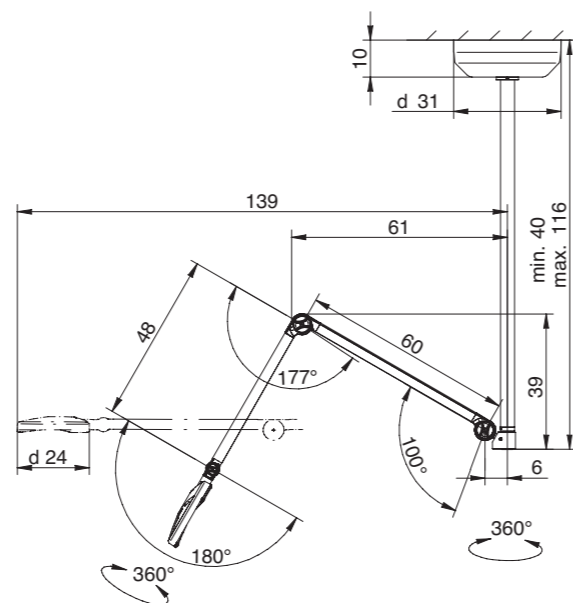

Plafonduitvoering


VISIANO – PLAFONDUITVOERING

BESTELNR.

VISIANO 20-2 CT1	zuiver wit / grijs	Vast gemonteerd	D15.450.000
------------------	--------------------	-----------------	-------------



Pinversie

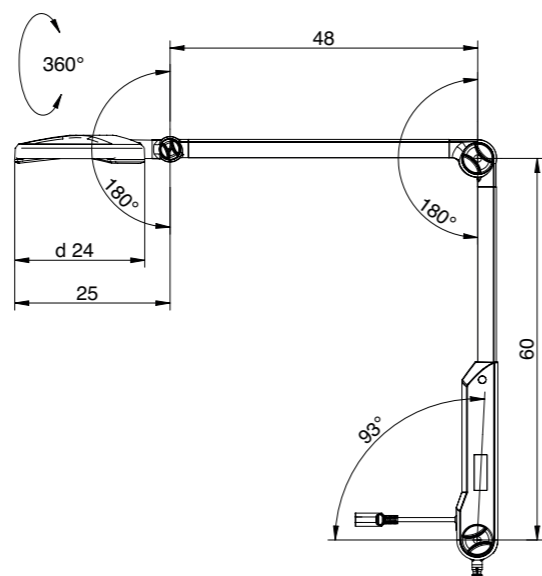


VISIANO – PINVERSIE

BESTELNR.

VISIANO 20-2 PTX	zuiver wit / grijs	Euro	D15.451.000
VISIANO 20-2 PTX	zuiver wit / grijs	UK	D15.456.000

VISIANO technisch

Lichtopbrengst	60.000 lx / 0,5 m
Kleurtemperatuur	3500 K & 4500 K
Lichtveld 1,0 m	Ø 21 cm *
Kleurweergave	Ra > 95
Bediening	Folieschakelaar op de armatuurkop
Accessoires	Adapter voor stoelconstructie
Beschermingsklasse	II
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Beschermingssoort	IP 20
Bijzonderheden	2 kleurtemperaturen, 4 dimstanden, antimicrobieel, draaibaar (360° draaibare-as)

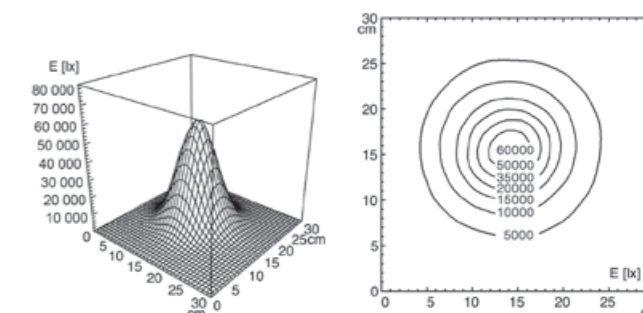


* Tolerantie -10% / +20%

ACCESSOIRES



VERRIJDBAAR STATIEF RL

Materiaal	Roestvrij staal
Afmetingen	0,8 m
Gewicht (netto)	6,6 kg
voor pen Ø	16 mm met losneembeveiliging
Bestelnummer	D14.022.000

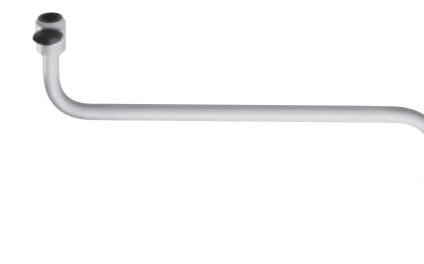

VERLENGINGSARM

Materiaal	Staal / stalen buis met poedercoating
Afmetingen	400 mm, Ø 16 mm
Gewicht (netto)	ca. 0,65 kg
voor pen Ø	16 mm met losneembeveiliging
Draagkracht	2,5 kg
Bestelnummer	D13.363.000 - zuiver wit



RAILBEVESTIGING

Materiaal	Aluminium
Draagdelen	25-35 x 8-10 mm
Bestelnummer	D13.269.000



TAFELKLEM

Materiaal	Polyamide, staal
Bestelnummer	D14.228.000 - zwart



WANDHOUDER

Materiaal	Polyamide glasvezel
Bestelnummer	D13.231.000 - zuiver wit



WAARDENBURG
MEDICAL

Dorpsstraat 8a
4181 BN Waardenburg

www.waardenburgmedical.com
info@waardenburgmedical.com

+31(0) 418 651 078
+31(0) 61066 2894

Derungs Licht AG

Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Zwitserland
Telefoon +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Derungs Licht AG is onderdeel van de Waldmann Group

