


provita[®]
medical



Branca

Behandlungswagen
für die Rückenentlastung
von Menschen im
Gesundheitsdienst

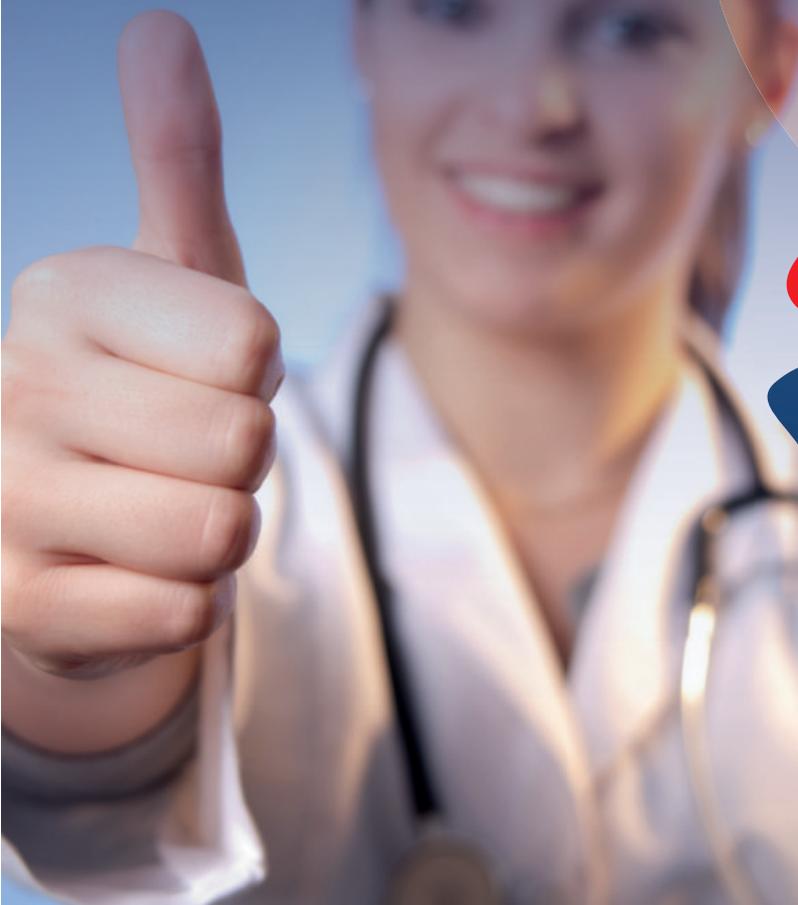


Das
Kreuz
mit dem
Kreuz

Mit Branca gegen Rückenschmerzen von Pflegekräften und Ärzten

Das Problem: Den jährlich erscheinenden Berichterstattungen der gesetzlichen Krankenkassen und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zufolge ist das Wirbelsäulensyndrom (Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule = Rückenschmerzen) hierzulande seit Jahren einer der häufigsten Krankschreibungsgründe. Expertenschätzungen zufolge haben aktuell über 25 Millionen Menschen mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Im Jahr 2011 waren laut Angaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems – von denen die Rückenschmerzen den größten Anteil ausmachen – die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit und Fehltage. Das Thema ist bekannt und vielen Pflegekräften leider auch die damit verbundenen Schmerzen, denn Statistiken zufolge kann sich die Anzahl der Neigungen, die mehr als 20° betragen, pro Schicht auf über 2.000 Oberkörpervorbeugungen belaufen. (Quelle: Pflegeportal Community)

Die Lösung: Mit der Behandlungseinheit Branca lassen sich viele tägliche Patientenbehandlungen in rückschonender Haltung durchführen. Die patentierte Kombination eines ergonomischen Hockers mit einer Arm- und Beinauflage ermöglicht eine ideale Patientenversorgung, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Während der Arm/das Bein auf der höhenverstellbaren Ablage platziert wird, kann sich die Pflegekraft in aufrecht sitzender Haltung ganz dem Wohle des Patienten widmen. Wundversorgung, Blutentnahme, das Anlegen von Verbänden usw. sind nicht länger Tätigkeiten, die Rückenschmerzen verursachen, da sowohl der Patient als auch die Pflegekraft die ideale Haltung finden, die zusätzlich noch für eine bessere Durchblutung des Körpers sorgt.

Alle Bauteile von Branca sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und lassen sich individuell an die Situation anpassen. Das provisorische und häufig unhygienische Ablegen von Gegenständen und Verbrauchsmaterialien auf dem Patientenbett kann durch die Ablageplatte oder angebaute Körbe auf ein Minimum begrenzt werden. Zusätzlich ist die Behandlungseinheit Branca mobil und kann dadurch im klinischen Einsatz umfassend genutzt werden. Mit Branca erreicht die Pflege ein besseres Arbeitsschutzniveau und bessere Arbeitsbedingungen. Gesunde, leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter werden gehalten und krankheitsbedingte Ausfallzeiten und Kosten werden reduziert.

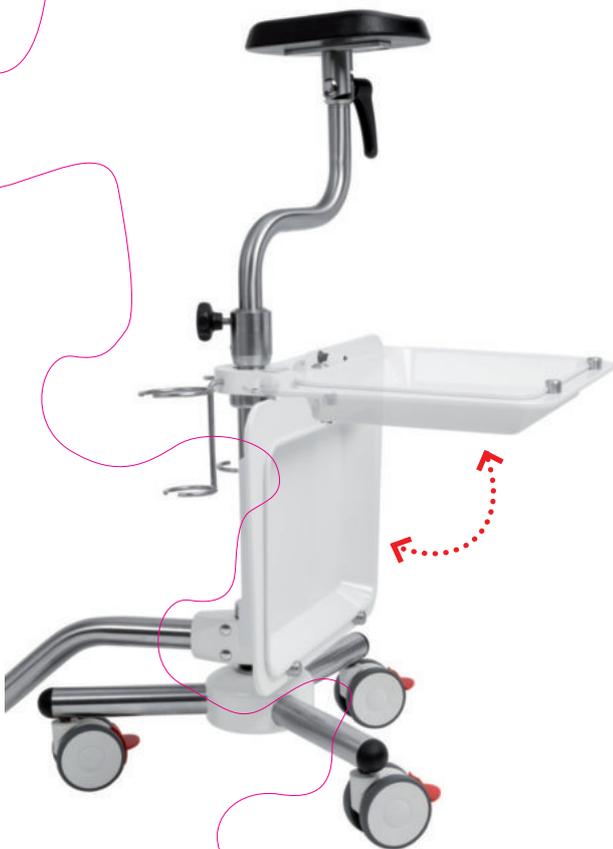

Branca

Die patentierte ergonomische Behandlungseinheit

- + Deutlich geringere Belastung der Wirbelsäule durch ergonomische Sitzposition
- + Geringere Ausfallzeiten durch Krankheit/ Rückenbeschwerden
- + Hygienisches Arbeiten neben dem Bett
- + Schaumpuffer sorgt für geräuschloses Handling der Sitzmechanik




Material	Edelstahl / Aluminium
Arm- und Beinauflage	Polster aus PU-Schaum
Sattelsitz	Sitzfläche aus PU-Schaum
Rollen	7 Doppelrollen Ø 75 mm, davon 3 mit Totalfeststeller
Sitzmechanik	Aluminium, schwarz pulverbeschichtet
Sitzhöhenverstellung	ca. 155 mm mit Gasdruckfeder
Höhenverstellung	
Arm-/Beinauflage	ca. 830 – 1.100 mm
Horizontaler Verstellbereich	ca. 190 mm

optionales Zubehör

- Ablagetablett aus Melamin, abklappbar und herausnehmbar (ca. 340 x 227 mm) mit Halter für Abwurfbehälter und Desinfektionsmittelflasche bis Ø 69 mm
- Edelstahl Ablagekorb (ca. 300 x 200 x 100 mm)
- Edelstahl Sterilgutkorb (ca. 300 x 200 x 200 mm)
- Schiebegriff aus Edelstahl-Rundrohr



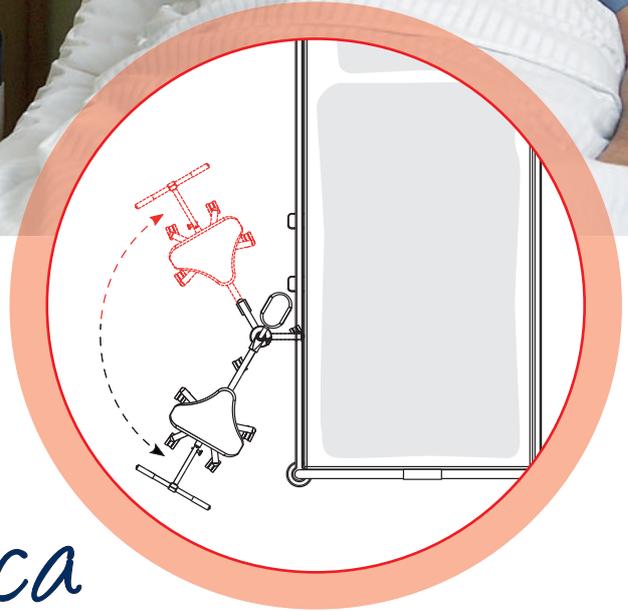

Branca

Die patentierte ergonomische Behandlungseinheit

YouTube <https://youtu.be/obP-e3CQxp8>



WAARDENBURG
MEDICAL

Dorpsstraat 8a
4181 BN Waardenburg

+31(0) 418 651 078
+31(0) 61066 2894

www.waardenburgmedical.com
info@waardenburgmedical.com

provita
medical

provita medical gmbh & co. kg
Auf der Huhfuhr 8
42929 Wermelskirchen
Germany

Telefon: +49 (0) 21 93 / 51 05 - 0
Fax: +49 (0) 21 93 / 51 05 - 269

info@provita.de
www.provita.de

