



CURA

VERSORGUNGSEINHEIT

Maßgeschneidert. Für jeden Raum. Für jeden Bedarf.




CURA



Cura-H: Zweizügige, horizontale Variante mit integrierten Normgeräteschienen

Modular, hygienisch, maßgefertigt: Das Cura-Wandversorgungssystem aus **eloxiertem** oder **pulverbeschichtetem Aluminium** integriert alle Elektro- und Gasversorgungen in einem System:

- Einklickbare Kanalabdeckungen,
- flächenbündige Einbauten für maximale Hygienefreundlichkeit
- frontseitige, einklickbare Kanalabdeckungen für schnelle Zugänglichkeit und Wartung
- Maximal konfigurierbar ohne Rastermaß, bis zu 6m am Stück gefertigt

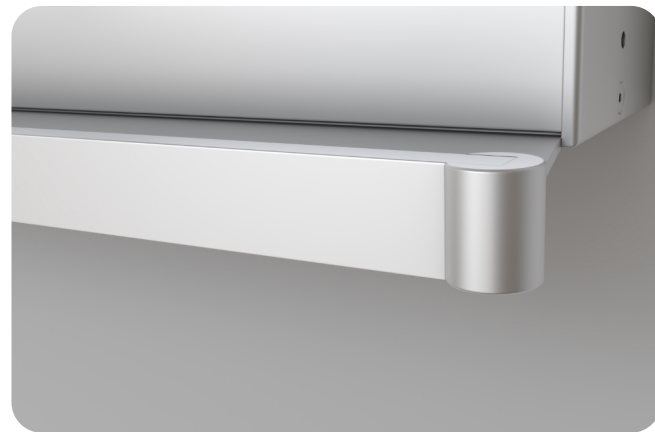

Untere Normgeräteschiene 25x10mm

CURA



Cura-V: Vertikale Anordnung

Cura-V – Vertikale Anordnung:

- Platzsparend mit der Option, zwei Patientenplätze zu versorgen
- Standardhöhe 1,5 m - individuelle Maße möglich
- Optional: Seitliche Edelstahl-Rundrohre (Ø 35 mm) nehmen Monitorträger, Infusionsstangen und weiteres Zubehör auf

Einspeisung:

- Unsere Versorgungseinheiten können flexibel rückseitig, seitlich oder von oben (z.B. mit Zuführungskanelen) mit Medien versorgt werden

Einbauten

- Steckdosen : 230V Schuko, optional mit Beschriftungsfeld, Kontrolleuchte, erhöhter Berührungsschutz oder CEE
- Potentialausgleich
- Datenanschluss: Flächenbündig mit Keystone-Jacks oder konventionell
- Gasentnahmeventile gem. DIN EN ISO 9170-1, Deutscher Standard: DIN 13260-2. Farbneutral oder nach ISO 32
- Anbindung an Anästhesiegas-fortleitungssystem (AGFS)
- Sonstige Einbauten: Taster, Schalter, Lichtrufe u. v. m.

Von der Planung bis zur Montage - wir begleiten Sie mit der richtigen Lösung.


CURA

Technische Daten

IP-Schutzart IP20

Schutzklasse I

Risikoklasse gem.
Verordnung (EU)
2017/745 IIb

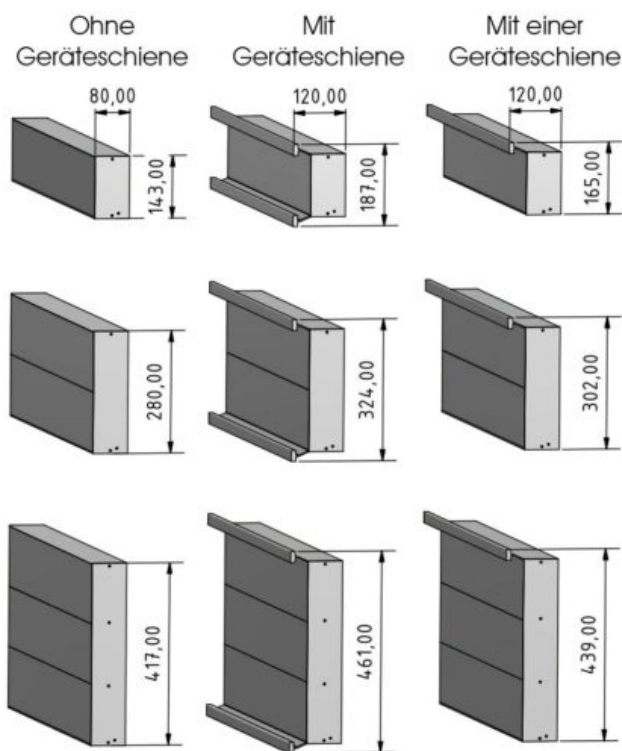

Variante

Gewicht in kg/m (ohne Einbauten)

Einfach ohne Geräteschiene	5,3
Zweifach ohne Geräteschiene	10
Dreifach ohne Geräteschiene	14,7
Einfach mit Geräteschiene	7,5
Zweifach mit Geräteschiene	12,3
Dreifach mit Geräteschiene	17
Einfach mit einer Geräteschiene	6,4
Zweifach mit einer Geräteschiene	11,16
Dreifach mit einer Geräteschiene	15,9

Belastbarkeit je Geräteschiene 25 kg/m

Standardfarben RAL 9016 (Verkehrsweiß) oder Aluminium natureloxiert