



INTEGRA

VERSORGUNGSEINHEIT

Funktional. Ästhetisch. Integriert.




INTEGRA



Integra vereint medizinische Versorgungstechnik und moderne Beleuchtung in einem schlanken, wohnlichen System - damit sich die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche konzentriert: die Genesung der Patienten.

Beleuchtung – angenehm und dynamisch

Integra schafft mehr als Helligkeit - sie erzeugt eine Raumatmosphäre, die sich jeder Situation anpasst. Alle Komponenten sind als energieeffiziente LED-Lösung ausgeführt.

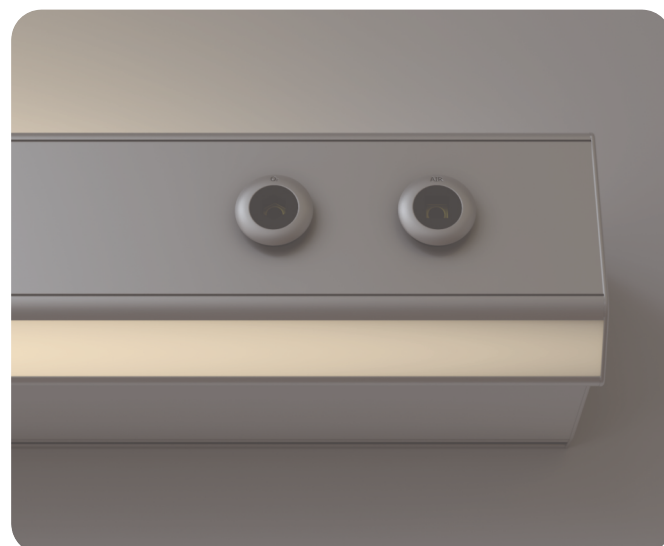

Optionen:

- Dimmbar via DALI oder Taster
- Standard-Lichtfarben: 3000K (warmweiß) oder 4000K (neutralweiß)
- Verstellbare Lichtfarbe oder Integration in eine zirkadiane Beleuchtungssteuerung
- RGB-Variante für individuelle Farbakzente

INTEGRA

Flexibel

Baulich getrennte Kanäle ermöglichen die vollständig unabhängige Installation von Gas- und Elektrokomponenten - frontseitig wie unterseitig. Alle Einbauten sind in beiden Kanälen möglich; typischerweise werden Gasentnahmeventile an der Front und die Elektroinstallation verdeckt an der Unterseite untergebracht.



Zubehörnut

Eine in das Gehäuse integrierte Nut an der Unterseite ermöglicht die werkzeuglose Montage von Zubehör direkt durch den Anwender - ohne Umbau oder Fachpersonal.



Typische Anbauteile wie Infusionshaken, Stativrohre oder Normgeräteschienen lassen sich flexibel positionieren und jederzeit umrüsten. Mit einer Streckenlast von 30 kg/m ist die Nut auch für anspruchsvolle Konfigurationen ausreichend dimensioniert. Für individuelle Anforderungen entwickeln wir gerne Sonderlösungen - sprechen Sie uns an.

INTEGRA



Infusionshaken 2-fach

Bestellnummer: 96501



Infusionshaken 4-fach

Bestellnummer: 96502



Infusionsrohr D=25mm

Bestellnummer: 96500



Geräteschienen-Kombination

Bestellnummer: 96503

INTEGRA

Funktionsweise:



Planungshinweise:

Einspeisung:

- Unsere Versorgungseinheiten können flexibel rückseitig, seitlich oder von oben (z.B. mit Zuführungskanelen) mit Medien versorgt werden

Einbauen



- Steckdosen : 230V Schuko, optional mit Beschriftungsfeld, Kontrollleuchte, erhöhter Berührungsschutz oder CEE
- Potentialausgleich
- Datenanschluss: Flächenbündig mit Keystone-Jacks oder konventionell
- Gasentnahmeventile gem. DIN EN ISO 9170-1, Deutscher Standard: DIN 13260-2. Farbneutral oder nach ISO 32
- Anbindung an Anästhesiegas-fortleitungssystem (AGFS)
- Sonstige Einbauten: Taster, Schalter, Lichtrufe u. v. m.

INTEGRA

Technische Daten

IP-Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Risikoklasse gem. Verordnung (EU) 2017/745	IIb
Standardfarben	RAL 9016 (Verkehrsweiß) oder Alu natureloxiert
Belastbarkeit (Zubehörnüt)	Max. 30 kg/m
Gewicht (ohne Einbauten)	ca. 9,5 kg/m
Abmaße Querschnitt (H x T)	160mm x 175mm
Max. ungeteilt lieferbare Profillänge	6000mm
Modul Direktbeleuchtung (Standard)	ca. 2400lm dimmbar (DALI), Lichtfarbe 4000K
Modul Indirektbeleuchtung (Standard)	ca. 4800lm dimmbar (DALI), Lichtfarbe 4000K

Leuchte : INTEGRA / indirekt / Raumlicht
Datei : MT1004100

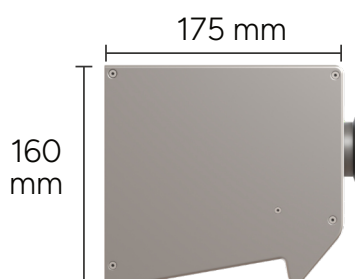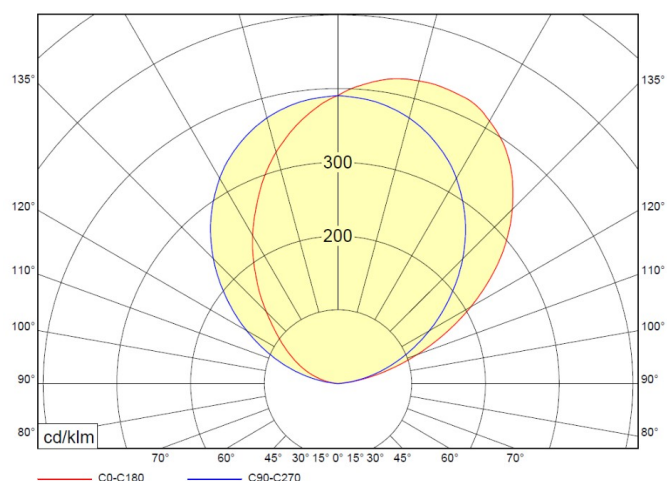

Leuchte : INTEGRA / direkt / Untersuchung-/Lesebeleuchtung
Datei : MT1003100

