



LIGNO

VERSORGUNGSEINHEIT

Funktional. Diskret. Wohnlich.





Modular aufgebaut, individuell konfiguriert

Ligno vereint medizinische Versorgungstechnik mit einem wohnlichen Raumgefühl - dank Holzverkleidung aus HPL fügt sie sich harmonisch in jedes Pflegezimmer ein. Technik, die sich zurückhält. Atmosphäre, die bleibt.

Versorgungskanäle lassen sich je nach Bedarf horizontal oder vertikal in den Korpus integrieren - mit frontalem oder seitlichem Zugang. So entsteht für jeden Einsatzbereich die passende Lösung.

Ligno-V – Vertikale Versorgungseinheit

Kompakt, funktional und optisch ansprechend: Die Ligno-V versorgt Bettplätze mit allen notwendigen Gas- und Elektroanschlüssen.

Gas- und Elektroinstallationen sind wahlweise seitlich, frontal oder kombiniert zugänglich. Die einklickbaren Kanalabdeckungen ohne Verschraubung sowie der flächenbündige Steckdoseneinbau erfüllen höchste Hygieneanforderungen. Das schlanke Aluminiumprofil fügt sich unauffällig in das Raumkonzept ein und lässt sich farblich sowie mit einer Holzumkleidung individuell gestalten.



Auch als Zweibett-System

Als zentrale Versorgungssäule steht die Ligno-V frei zwischen zwei Betten und erschließt beide Bettplätze gleichzeitig - wirtschaftlich und platzsparend. Beidseitig bestückt mit Gas- und Stromanschlüssen, bietet sie volle Versorgung ohne doppelten Aufwand.

Integrierte, optionale Stativrohre ermöglichen die flexible Positionierung von Infusionsständern, Monitoren und weiterem medizintechnischen Zubehör. Die Rohre nehmen handelsübliche Klemmhalter und Normzubehör auf - schnell umgerüstet, sicher befestigt.





Ligno-H – Horizontale Versorgungseinheit

Ligno-H verläuft wandseitig hinter dem Bettplatz und nimmt alle Versorgungs- und Datenanschlüsse platzsparend in sich auf. Die Kanäle werden millimetergenau gefertigt - ohne Rastermaß, exakt auf die jeweilige Raumsituation abgestimmt.

Normgeräteschienen an Ober- und/oder Unterseite nehmen sämtliches Zubehör auf. Bei umfangreicher Geräteausstattung lässt sich das System durch ein schienengeführtes Laufwagensystem ergänzen.

In Kombination mit einer HPL-Holzumkleidung entsteht ein Patientenzimmer, das kaum noch an ein klassisches Krankenhauszimmer erinnert - und trotzdem voll funktional ist.



Projektbezogene Planung – Ihre Anforderung. Unsere Lösung.

Kein Raum ist wie der andere. Für Situationen, in denen Standardlösungen nicht passen, entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Versorgungslösung - von der ersten Skizze bis zur fertigen Montage.

Ob ungewöhnliche Raumgeometrien oder die Integration in ein übergeordnetes Innenarchitekturkonzept: Wir realisieren Versorgungseinheiten, die technisch und gestalterisch genau auf Ihr Projekt abgestimmt sind.

Sprechen Sie uns früh im Planungsprozess an - so lassen sich die besten Ergebnisse erzielen.



LIGNO

Planungshinweise:

Einspeisung:

- Unsere Versorgungseinheiten können flexibel rückseitig, seitlich oder von oben (z.B. mit Zuführungskanelen) mit Medien versorgt werden

Einbauten

- Steckdosen : 230V Schuko, optional mit Beschriftungsfeld, Kontrollleuchte, erhöhter Berührungsschutz oder CEE
- Potentialausgleich
- Datenanschluss: Flächenbündig mit Keystone-Jacks oder konventionell
- Gasentnahmeventile gem. DIN EN ISO 9170-1, Deutscher Standard: DIN 13260-2. Farbneutral oder nach ISO 32
- Anbindung an Anästhesiegas-fortleitungssystem (AGFS)
- Sonstige Einbauten: Taster, Schalter, Lichtrufe u. v. m.

Technische Daten

IP-Schutzart

IP20

Schutzklasse


I

Risikoklasse gem.
Verordnung (EU)
2017/745

IIb

Gehäusematerial

Aluminium/
Spanplatte P2 mit
HPL-Beschichtung

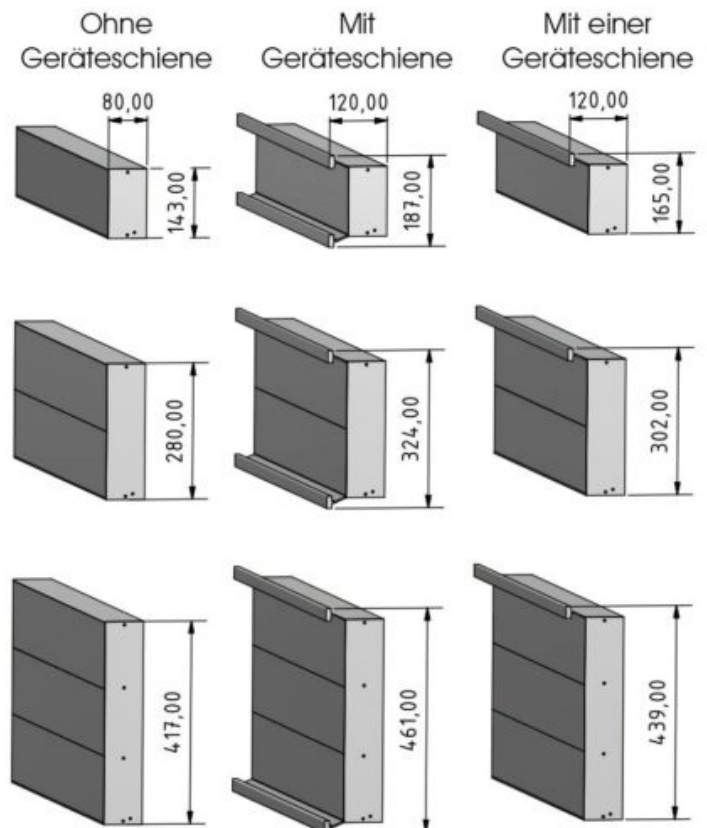

Gewicht (ohne Einbauten)

Projektabhängig

Abmaße Querschnitt (H x T)

Projektabhängig