


Typenliste gültig ab 1. Juli 2017

profilstark und robust

Gerätewagensysteme

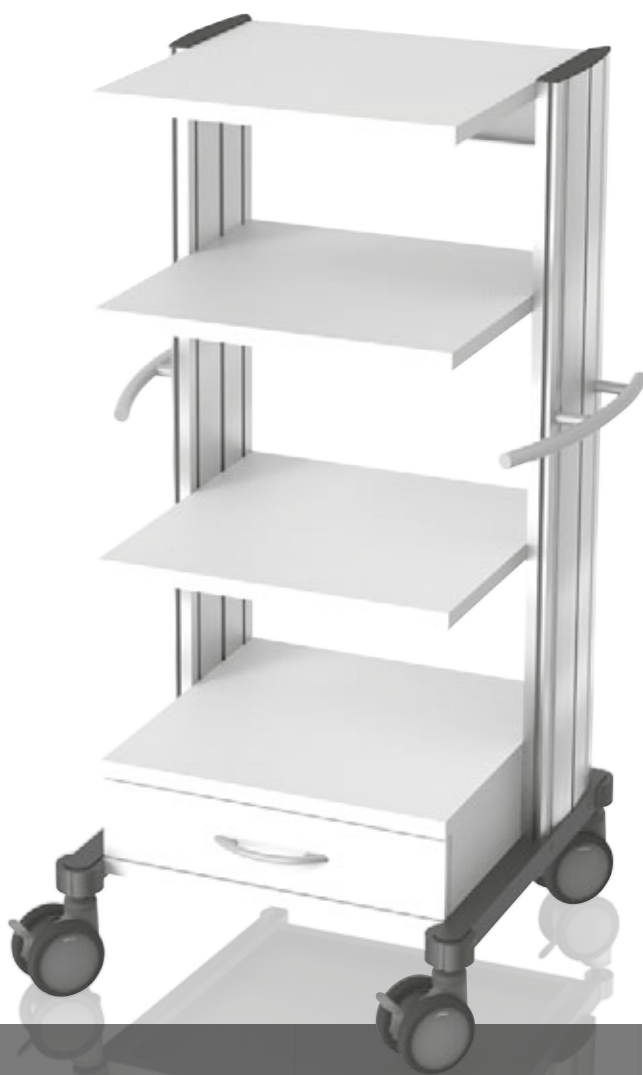

swingo®

swingo

swingo® 45 und 60

Das profilstarke Gerätewagensystem in Holz-Kunststoff-Version

Basis des **swingo®** Wagensystems ist ein starkes **Aluminium-Trägerprofil**. Es bietet viele Befestigungsmöglichkeiten für diverse Systemteile und Zubehör. Ein integrierter Kabelkanal ermöglicht komfortables Kabelmanagement. Im Profil können von oben Stangen mit Ø 25 mm platzsparend eingeschoben werden. Platten und Schubladen lassen sich in Rasterhöhe bequem befestigen.

- **Fahrgestell:** Aus Stahlrohr Feinstruktur matt, grau (RAL 7012) pulverbeschichtet.
- **Rollen:** Serienmäßige Leichtlaufrollen, Ø 100 mm oder Ø 125 mm mit grauen Stoßschutzkappen. Optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.

- **Platten:** Holz-Kunststoff-Kombination, hochwertig weiß beschichtet, mit allseitig umlaufenden Massivkanten (22 mm stark), lichteht und formaldehydfrei.
- **Schubladen:** Holz-Kunststoff-Kombination, hochwertig beschichtet, lichteht und formaldehydfrei. Schwebelichte Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, geschlossene, leicht zu reinigende Flächen.
- **Farben:** Schiebegriffe und Dekorstreifen in 3 Akzentfarben nach NCS-Design-Skala: grau, blau, gelb. Schubladengriffe sind zusätzlich in rotviolett, türkis, weiß und schwarz erhältlich.

- **Traglast:** Schubladen-Flächenbelastung bis 10 kg, Platten-Flächenbelastung bis 30 kg, maximale Gesamtlast unter Berücksichtigung der Kippsicherheit bis 120 kg.
- **Maße:**

Breite	swingo® 60: 700 mm
	swingo® 45: 545 mm
Tiefe	swingo® 60: 560 mm
	swingo® 45: 560 mm
- **Höhen:** unterschiedlich, je nach Modell. Sonderhöhen auf Wunsch lieferbar. Rasterhöhe 52 mm.

Ein Qualitätsprodukt made in Stuttgart. Geschmacks- und gebrauchsmustergeschützt, Europäisches Patent.

swingo®-clinic 45 und 60

Das robuste Gerätewagensystem in Metall-Version

swingo®-clinic ist die Serie in Metallausführung für die Klinik. Optisch ist das System exakt auf die swingo®-Linie abgestimmt und bietet zahlreiche weitere Vorteile:

- **Robuste, verwindungsfeste Metallausführung** mit hoher Belastbarkeit bis 130 kg bei Rollen mit Ø 100 mm oder 125 mm, bis 250 kg bei Rollen mit Ø 150 mm.
- **Platten und Schubladen:** aus hochwertig beschichtetem Stahlblech, desinfektionsmittel-fest, leicht zu reinigen und lichteht, grauweiß (RAL 9002). Alle Platten sind einheitlich

22 mm stark und sehr stabil. Durch die vierfache Befestigung wird eine unerwünschte Neigung der Platten bei Belastung vermieden. Flächenbelastung bis 50 kg.

- **Das starke Aluminium-Trägerprofil** bietet ungeahnte Befestigungsmöglichkeiten für Systemteile und Zubehör aller Art.
- **Der integrierte Kabelkanal** bietet komfortables Kabelmanagement.
- **Schubladen** mit Teleskop Vollauszug und moderner Führung sichern hohen Bedienkomfort. Flächenbelastung bis 10 kg.

- **Rollen:** hochwertige Leichtlaufrollen in drei Größen (Ø 100, 125 oder 150 mm) garantieren auch in voll beladenem Zustand die problemlose Manövrierfähigkeit der Wagen.
- **Farben:** Schiebegriffe und Dekorstreifen in 3 modernen Akzentfarben grau, blau, gelb sind nach NCS-Design-Skala wählbar. Schubladengriffe sind zusätzlich in rotviolett, türkis, weiß und schwarz erhältlich.

Bitte die praktischen und form-schönen Schiebegriffe separat bestellen.



Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801

In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicherer Schutz bietet ein Potentialausgleich.

Deshalb wird ab Werk bei ausgewählten Gerätewagen ein POAG-Pin montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte entsprechende Potentialausgleichsleitung dazu bestellen. Unser Team berät Sie gerne.

Beim Gerätewagensystem **swingo-clinic** wird ein POAG-Pin hinten in der Bodenplatte befestigt. Eine Nachrüstung seitens des Kunden ist bei diesem Wagensystem nicht möglich.

Achtung:

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Funktionswagen – mit Ausnahme des Basismodells mit einer Schublade – werden ohne Aufpreis montiert geliefert.



Bitte beachten Sie: Die Rücksendung von zerlegter Ware wird nur anerkannt, wenn die Teile noch nicht montiert waren und in einwandfreiem Zustand sind!

Eine besondere Spezialität des Hauses **HAEBERLE** sind maßgeschneiderte OEM-Versionen für Industriekunden. Sie nennen uns Ihre Spezifikationen und wir konfigurieren Ihren Gerätewagen. Fragen Sie uns!




Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall



swingo® 35 - Sondermodell ≙ Plattenbreite 350 mm

Sonographiewagen 	Fahrgestell mit Bodenplatte, Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 645 mm, oben 1 Platte mit Sondermaß 350 x 550 mm (B x T) mit Frontgriff, 1 Ablageplatte 350 x 450 mm (B x T), Quertraverse, lichte Höhe zwischen den Platten: 240 mm. Maße: 450 x 610 x 811 mm (B x T x H)	Schubladengriff und Dekorstreifen in: grau 16831 blau 16832 gelb 16834	
Schublade 100 mm hoch 	zur Montage unter einer Ablageplatte; mit schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus. Innenmaße: 278 x 384,5 x 74 mm (B x T x H)	Schubladengriff: grau 16841 blau 16842 gelb 16844	

swingo® 45 + swingo®-clinic 45 ≙ Plattenbreite 450 mm



Basiswagen / Gerätewagen			
Basiswagen 	mit 1 Schublade, Rollen Ø 100 mm; Schiebegriffe bitte extra bestellen; Lieferung zerlegt; Montage gegen Aufpreis möglich. Maße: 545 x 560 x 811 mm (B x T x H) Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11	Schubladengriff und Dekorstreifen in: grau 13191 blau 13192 gelb 13194	mit POAG-Pin 13171 13172 13174

Bei Trägerprofil-Höhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen muss zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse, eingebaut werden. Lieferung erfolgt ohne Aufpreis montiert.

Gerätewagen 1 	Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Quertraverse, 4 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm hoch. Maße: 545 x 560 x 1.123 mm (B x T x H) Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.	Schubladengriff und Dekorstreifen in: grau 13881 blau 13882 gelb 13884	mit POAG-Pin 13691 13692 13694
Gerätewagen 2 NEU 	Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Quertraverse, 3 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Auszugsplatte 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm hoch. Maße: 545 x 560 x 1.123 mm (B x T x H) Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.	Schubladengriff und Dekorstreifen in: grau 16871 blau 16872 gelb 16874	mit POAG-Pin 13721 13722 13724




Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall

Endoskopiewagen / Ergometriewagen

<div>Endoskopiewagen</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern, 5 Ablageplatten 450 mm tief, Quertraverse, 1 Schublade 100 mm hoch.</p> <p>Maße: 545 x 560 x 1.417 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <table><tr><td>grau</td><td>13821</td></tr><tr><td>blau</td><td>13822</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13824</td></tr></table>	grau	13821	blau	13822	gelb	13824	<p>mit POAG-Pin</p> <table><tr><td>13081</td></tr><tr><td>13082</td></tr><tr><td>13084</td></tr></table>	13081	13082	13084
grau	13821											
blau	13822											
gelb	13824											
13081												
13082												
13084												
<div>Ergometriewagen</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, 1 Schublade 100 mm hoch, obere Platte 300 mm tief, Kabel und Schlauchhalter, Ref.-Nr.13926.</p> <p>Maße: 545 x 560 x 1.123 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <table><tr><td>grau</td><td>16451</td></tr><tr><td>blau</td><td>16452</td></tr><tr><td>gelb</td><td>16454</td></tr></table>	grau	16451	blau	16452	gelb	16454	<p>mit POAG-Pin</p> <table><tr><td>16461</td></tr><tr><td>16462</td></tr><tr><td>16464</td></tr></table>	16461	16462	16464
grau	16451											
blau	16452											
gelb	16454											
16461												
16462												
16464												

swingo® 60 + swingo®-clinic 60 ≙ Plattenbreite 600 mm

Basiswagen / Unterfahrwagen / Schublade

<div><div>Basiswagen</div><div></div></div>	<p>mit 1 Schublade, Rollen Ø 100 mm; Lieferung zerlegt; Montage gegen Aufpreis möglich.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 811 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <table><tr><td>grau</td><td>13011</td></tr><tr><td>blau</td><td>13012</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13014</td></tr></table>	grau	13011	blau	13012	gelb	13014	<p>mit POAG-Pin</p> <table><tr><td>13001</td></tr><tr><td>13002</td></tr><tr><td>13004</td></tr></table>	13001	13002	13004
grau	13011											
blau	13012											
gelb	13014											
13001												
13002												
13004												
<div><div>Unterfahrwagen</div><div></div></div>	<p>zum mobilen Einsatz von Geräten unter einer Behandlungsliege. Mit 1 Schublade, Rollen Ø 100 mm; Lieferung zerlegt; Montage gegen Aufpreis möglich.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 500 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <table><tr><td>grau</td><td>13111</td></tr><tr><td>blau</td><td>13112</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13114</td></tr></table>	grau	13111	blau	13112	gelb	13114	<p>mit POAG-Pin</p> <table><tr><td>13071</td></tr><tr><td>13072</td></tr><tr><td>13074</td></tr></table>	13071	13072	13074
grau	13111											
blau	13112											
gelb	13114											
13071												
13072												
13074												
<div><div>Schublade 100 mm hoch</div><div></div></div>	<p>Mit schwebelichter Kugel-Teleskopführung mit Einrastmechanismus</p> <p>Innenmaße: 529 x 384,5 x 74 mm (B x T x H)</p>	<p>Schubladengriff in:</p> <table><tr><td>grau</td><td>13101</td></tr><tr><td>blau</td><td>13102</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13104</td></tr></table>	grau	13101	blau	13102	gelb	13104				
grau	13101											
blau	13102											
gelb	13104											
<p>Der Basiswagen kann insgesamt mit 6 Schubladen, der Unterfahrwagen mit 3 Schubladen ausgerüstet werden.</p>	<p>Mit Vollteleskopauszug</p> <p>Innenmaße: 506 x 396 x 74 mm (B x T x H)</p>	<table><tr><td>grau</td><td>13211</td></tr><tr><td>blau</td><td>13212</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13214</td></tr></table>	grau	13211	blau	13212	gelb	13214				
grau	13211											
blau	13212											
gelb	13214											



Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall

Computerwagen / Wagen für Monitoring / Gerätewagen / Endoskopiewagen

Praxiserprobte Kombinationen, die jederzeit ergänzt oder verändert werden können. Die Schiebegriffe sind in der Grundzusammenstellung nicht enthalten! Lieferung erfolgt ohne Aufpreis montiert.

<div>Computerwagen</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit Bodenplatte 300 mm, Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 645 mm. Schublade 100 mm hoch mit Auszug für Keyboard inkl. Auszug für Mousepad, Ablageplatte.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 811 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Dekorstreifen in:</p> <table><tr><td>grau</td><td>13631</td></tr><tr><td>blau</td><td>13632</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13634</td></tr></table> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p>Ausziehbare Platte, Metallversion (Siehe Seite 14) 16703</p> <p>Steckdosenleiste 4-fach, Standard (Siehe Seite 22) 21693</p>	grau	13631	blau	13632	gelb	13634	<p>mit POAG-Pin</p> <table><tr><td>13641</td></tr><tr><td>13642</td></tr><tr><td>13644</td></tr><tr><td>16703</td></tr><tr><td>21693</td></tr></table>	13641	13642	13644	16703	21693
grau	13631													
blau	13632													
gelb	13634													
13641														
13642														
13644														
16703														
21693														
<div>Wagen für Monitoring</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, 2 Ablageplatten, Schublade 100 mm hoch, Auszug für Keyboard inkl. Auszug für Mousepad rechts/ links, Quertraverse, Steckdosenleiste 4-fach, TFT-Halter mit Befestigung an Quertraverse.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 1.123 mm (B x T x H)</p>	<p>Dekorstreifen in:</p> <table><tr><td>grau</td><td>16491</td></tr><tr><td>blau</td><td>16492</td></tr><tr><td>gelb</td><td>16494</td></tr></table>	grau	16491	blau	16492	gelb	16494	<p>mit POAG-Pin</p> <table><tr><td>16501</td></tr><tr><td>16502</td></tr><tr><td>16504</td></tr></table>	16501	16502	16504		
grau	16491													
blau	16492													
gelb	16494													
16501														
16502														
16504														
<div>Gerätewagen</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Tragkraft bis 130 kg. 4 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm hoch, 1 Quertraverse.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 1.123 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <table><tr><td>grau</td><td>13671</td></tr><tr><td>blau</td><td>13672</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13674</td></tr></table>	grau	13671	blau	13672	gelb	13674	<p>mit POAG-Pin</p> <table><tr><td>13681</td></tr><tr><td>13682</td></tr><tr><td>13684</td></tr></table>	13681	13682	13684		
grau	13671													
blau	13672													
gelb	13674													
13681														
13682														
13684														
<div>Endoskopiewagen</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 150 mm, 2 Feststellern, Tragkraft bis 250 kg. 5 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm hoch, 1 Quertraverse zur Aufnahme einer Steckdosenleiste.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 1.445 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <table><tr><td>grau</td><td>13841</td></tr><tr><td>blau</td><td>13842</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13844</td></tr></table> <p>Endoskophalterung (Siehe Seite 21)</p>	grau	13841	blau	13842	gelb	13844	<p>mit POAG-Pin</p> <table><tr><td>13371</td></tr><tr><td>13372</td></tr><tr><td>13374</td></tr></table>	13371	13372	13374		
grau	13841													
blau	13842													
gelb	13844													
13371														
13372														
13374														

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®- clinic Metall

Endoskopiewagen / MIC-Wagen / Ergometriewagen / Injektionswagen

Endoskopiewagen 60.2 	<p>Fahrgestell mit Bodenplatte, Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig, 2 Feststellern, 4 Ablageplatten 45 cm tief, mit 1 frontseitigem Schiebegriff. 1 Auszugplatte, Schublade 100 mm hoch, Quertraverse, Unterbau-Trenntrafo, 2200 VA, mit zentralem Ausschalter (innen am Trägerprofil), seitlich Endoskophalterung mit Endoskoprohr, unten geschlossen.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 1.445 mm (B x T x H)</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau blau gelb</p>	<p>mit POAG-Pin</p> <p>16851 16852 16854</p>
MIC-Wagen 	<p>Fahrgestell nach hinten verlängert mit Bodenplatte und 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 150 mm, 2 Feststellern, Tragkraft bis 250 kg, inklusive Quertraverse und Anti-rutschbelag. 5 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm, 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter, 1 Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 1.445 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau blau gelb</p> <p>13851 13852 13854</p>	<p>mit POAG-Pin</p> <p>13461 13462 13464</p>
Ergometrie-/ Reizstromwagen 	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 1218 mm. Schublade 100 mm hoch, obere Platte 300 mm tief, Kabelhalter Ref.-Nr. 13926.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 1.384 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau blau gelb</p> <p>13331 13332 13334</p> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p>Zusätzliche Platte, 300 mm tief 13905 (Siehe Seite 14)</p>	<p>mit POAG-Pin</p> <p>13381 13382 13384</p> <p>13944</p>
Injektionswagen PicBox®Plus 	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 1218 mm. Schublade 100 mm hoch, Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung, Injektionsset PicBox® und KOMBI-Set, Kanülensammler Schluckfix (Set mit 20 Boxen), Abwurf mit Schale aus Edelstahl, Armauflage.</p> <p>Maße: 780 x 560 x 1.384 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau blau gelb</p> <p>13321 13322 13324</p> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p>Ampullenöffner CUPFIX 13921</p> <p>Untersuchungsleuchte (Siehe Seite 22)</p>	<p>mit POAG-Pin</p> <p>13391 13392 13394</p> <p>13921</p>





Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®- clinic Metall

Injektionswagen / Notfallwagen / Narkosewagen

<div>Injektionswagen COMPACT</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 1218 mm. Schublade 100 mm hoch, Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung, Injektionsset COMPACT, Kanülensammler „Medi-Müll“ (Set mit 20 Boxen), Abwurf mit Schale aus Edelstahl, Armauflage.</p> <p>Maße: 970 x 560 x 1.384 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau 13311 blau 13312 gelb 13314</p> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p>Ampullenöffner CUPFIX 13921 (Siehe Seite 21)</p>	<p>mit POAG-Pin</p> <p>13481 13482 13484</p> <p>13921</p>
<div>Notfallwagen 1</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 150 mm, 2 Feststellern Tragkraft bis 250 kg. Edelstahl-Arbeitsplatte mit Schwallkante, 2 Schubladen 100 mm hoch, 1 Schublade 200 mm hoch.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 873 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau 13521 blau 13522 gelb 13524</p> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p>Reanimationsbrett mit Halterung 17370 (Siehe Seite 21)</p> <p>Verplombung 13958 (Siehe Seite 13)</p>	<p>mit POAG-Pin</p> <p>13361 13362 13364</p> <p>17370</p> <p>13958</p>
<div>Notfallwagen 2</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 150 mm, 2 Feststellern. Tragkraft bis 250 kg. Ablageplatte 300 mm tief mit Antirutschbelag für Defibrillator, Edelstahl-Arbeitsplatte, 450 mm tief mit Schwallkante. 2 Schubladen 100 mm hoch, 1 Schublade 200 mm hoch.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 1.185 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau 13831 blau 13832 gelb 13834</p> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p>Reanimationsbrett mit Halterung 17370 (Siehe Seite 21)</p> <p>Verplombung 13958 (Siehe Seite 13)</p>	<p>mit POAG-Pin</p> <p>13421 13422 13424</p> <p>17370</p> <p>13958</p>
<div>Narkosewagen</div> <div></div>	<p>Fahrgestell mit Bodenplatte und 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern, Tragkraft bis 130 kg, Galerieaufsatz, 5 Schubladen 100 mm hoch.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 896 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau 13861 blau 13862 gelb 13864</p>	<p>mit POAG-Pin</p> <p>13441 13442 13444</p>

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®- clinic Metall

Gynäkologiewagen / Pultwagen / Stehschreibpultwagen / Wickelwagen

<p>Gynäkologiewagen</p> 	<p>Basismodell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, 1 beheizbare Schublade 100 mm hoch, 1 Schublade 100 mm hoch, Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung, Abwurf mit Schale aus Edelstahl, Instrumentenabwurf mit Polypropylen-Schale. Die Leuchte ist in dieser Modell-Zusammenstellung nicht enthalten.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 811 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau 13341 blau 13342 gelb 13344</p> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p>Steckdosenleiste 4-fach, Standard 21693</p> <p>Untersuchungsleuchten (Siehe Seite 22)</p> <p>Achtung: Falls Sie eine Leuchte dazu bestellen, ist nur 1 Schiebegriff möglich.</p>	
<p>Pultwagen</p> 	<p>Fahrgestell mit Bodenplatte 300 mm tief, Rollen Ø 100 mm 2 Feststellern. In der Neigung verstellbare Ablageplatte 450 mm tief mit Anti-Rutschkante, Schub-lade 100 mm hoch, Schubladen-abdeckplatte 450 mm tief, Schub-ladeneinsatz mit variabler Ein-teilung. Schreibhöhe ca. 1040 mm.</p> <p>Maße: 700 x 560 x 1.123 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau 13661 blau 13662 gelb 13664</p>	<p>mit POAG-Pin</p> <p>13451 13452 13454</p>
<p>Stehschreibpult-wagen</p> 	<p>Fahrgestell mit Bodenplatte 300 mm tief, Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Schublade 100 mm hoch. Pultaufsatz bestehend aus geneigter Schreibplatte, Maße: 600 x 450 mm (B x T). Utensilieneinsatz und Stifteköcher, Ablagefach, lichte Höhe (vorne): ca. 200 mm. Schreibhöhe: ca. 1030 mm</p> <p>Maße des Wagens: 700 x 560 x 1.150 mm (B x T x H)</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau 13351 blau 13352 gelb 13354</p>	
<p>Wickelwagen</p> 	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 645 mm. Gepolsterte Wickelauflage (wechselnde Dekore), Ablageplatte für Zubehör, Schublade 200 mm hoch, rechts Ablagekorb für Creme oder Puder, links 1 Abfallsammler "tomo".</p> <p>Maße: 700 x 750 x 928 mm (B x T x H)</p>	<p>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</p> <p>grau 12261 blau 12262 gelb 12264</p>	
<p>Wickelauflage</p>	<p>einzel (wechselnde Dekore)</p>	<p>14875</p>	



Systemteile für swingo + swingo-clinic 45 und 60

Die Referenznummern beinhalten das Systemteil komplett mit Befestigungsmaterial. Individuell konfigurierte Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert.

Fahrgestelle

für Wagen 45

Fahrgestell 45 mit Bodenplatte

Bitte beachten:
Um optimale Stabilität zu erreichen, **muss** jeder Wagen mindestens 1 Schublade oder 1 Quertraverse, Ref.-Nr. 16555, enthalten! Siehe Seite 17.

Platte: 450 x 450 mm (B x T)

Maße: 545 x 560 mm (B x T) mit grauen Stoßschutzkappen und
 ✕ Rollen Ø 100 mm, Belastung bis zu 130 kg, Höhe 163 mm

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall ✕
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13130	13100

✕ Rollen Ø 125 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis zu 130 kg, Höhe 196 mm

13120	13110
-------	-------

für Wagen 60

Fahrgestell 60 mit Bodenplatte

Bitte beachten:
Um optimale Stabilität zu erreichen, **muss** jeder Wagen mindestens 1 Schublade oder 1 Quertraverse, Ref.-Nr. 16554, enthalten! Siehe Seite 17.

Platte: 600 x 450 mm (B x T)

Maße: 700 x 560 mm (B x T), mit grauen Stoßschutzkappen und
 ✕ Rollen Ø 100 mm, Belastung bis zu 130 kg, Höhe 163 mm

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall ✕
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13300	13600

✕ Rollen Ø 125 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis zu 130 kg, Höhe 196 mm

13200	13500
-------	-------

✕ Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig, 2 davon feststellbar, Belastung bis zu 250 kg, Höhe 224 mm

13400	13700
-------	-------

Fahrgestell 60 hinten verlängert

zur Aufnahme von Sauerstoff-Flaschen, inkl. Quertraverse und Anti-Rutschmatte für sicheren Halt.

Platte: 600 x 450 mm (B x T)

Maße: 700 x 710 mm (B x T) mit grauen Stoßschutzkappen und
 ✕ Rollen Ø 150 mm, Belastung bis zu 250 kg, Höhe 225 mm

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall ✕
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13900	13800

Fahrgestell 45 mit Bodenplatte

die **300 mm tiefe** Bodenplatte eignet sich speziell für sitzende Tätigkeiten.

Platte: 450 x 300 mm (B x T)

Maße: 545 x 560 mm (B x T) mit grauen Stoßschutzkappen und
 ✕ Rollen Ø 100 mm, Belastung bis zu 130 kg, Höhe 163 mm

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall ✕
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16671	16672

Fahrgestell 60 mit Bodenplatte

die **300 mm tiefe** Bodenplatte eignet sich speziell für sitzende Tätigkeiten.

Platte: 600 x 300 mm (B x T)

Maße: 700 x 560 mm (B x T) mit grauen Stoßschutzkappen und
 ✕ Rollen Ø 100 mm, Belastung bis zu 130 kg, Höhe 163 mm


swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall ✕
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16673	16674

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®- clinic Metall

Rollen / Trägerprofile




Rollen Ø 100 mm 	Aufpreis für 2 feststellbare Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, Belastung bis ca. 130 kg.	13906	13906
	Elektrisch leitfähig: Aufpreis für 4 Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 130 kg.	13907	13907
Rollen Ø 125 mm 	Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 130 kg.	13938	13938
	Elektrisch leitfähig: Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 130 kg.	13939	13939
Rollen Ø 150 mm 	Aufpreis für 4 Metallrollen, Ø 150 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 250 kg.	15702	15702
	Elektrisch leitfähig: Aufpreis für 4 Metallrollen, Ø 150 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 250 kg.	13940	13940

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse Ref.-Nr. 16555 bzw. 16554 unbedingt erforderlich. Siehe Seite 17.

Trägerprofile, 1 Paar Standardhöhen 	Superstabile Aluminium-Trägerprofile mit integriertem Kabelkanal und Dekorstreifen in grau, blau oder gelb. Die Gesamthöhe des Wagens ist von der Rollengröße abhängig.	<u>Profilhöhe: 645 mm</u> Dekorstreifen in:		
		grau	13611	13611
		blau	13612	13612
		gelb	13614	13614
		<u>Profilhöhe: 801 mm</u> Dekorstreifen in:		
		grau	16681	16681
		blau	16682	16682
		gelb	16684	16684
		<u>Profilhöhe: 957 mm</u> Dekorstreifen in:		
		grau	13711	13711
		blau	13712	13712
		gelb	13714	13714
		<u>Profilhöhe: 1217 mm</u> Dekorstreifen in:		
		grau	13621	13621
		blau	13622	13622
		gelb	13624	13624

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall

Trägerprofile / Zusatzkabelkanal / Schiebegriffe / Schubladengriffe


<div>Trägerprofile, 1 Paar Individualhöhen</div> <div></div>	<div>Bitte das Maß im 52 mm-Raster angeben!</div> <div>Die Gesamthöhe des Wagens ist von der Größe der Rollen abhängig. Bitte Türhöhen beachten!</div> <table><tr><th>Profilhöhe \ Farben</th><th>grau</th><th>blau</th><th>gelb</th></tr><tr><td>0 – 645 mm</td><td>13731</td><td>13732</td><td>13734</td></tr><tr><td>0 – 1217 mm</td><td>13741</td><td>13742</td><td>13744</td></tr><tr><td>0 – 1841 mm</td><td>13751</td><td>13752</td><td>13754</td></tr></table>	Profilhöhe \ Farben	grau	blau	gelb	0 – 645 mm	13731	13732	13734	0 – 1217 mm	13741	13742	13744	0 – 1841 mm	13751	13752	13754			
Profilhöhe \ Farben	grau	blau	gelb																	
0 – 645 mm	13731	13732	13734																	
0 – 1217 mm	13741	13742	13744																	
0 – 1841 mm	13751	13752	13754																	
<div>Zusatzkabelkanal</div> <div></div>	<div>bietet zusätzlichen Raum zur Unterbringung mehrerer Kabel.</div> <div>Elegantes Aluminiumprofil, passend zum swingo®-Profil. Montage mittig, hinten oder seitlich, rechts bzw. links an Platten.</div> <div>Bitte die Höhe bei der Bestellung angeben.</div> <table><tr><td>Höhe 957 mm</td><td>16187</td><td>16187</td></tr><tr><td>Höhe 1217 mm</td><td>16180</td><td>16180</td></tr><tr><td>variable Höhe 1841 mm</td><td>16182</td><td>16182</td></tr></table>	Höhe 957 mm	16187	16187	Höhe 1217 mm	16180	16180	variable Höhe 1841 mm	16182	16182										
Höhe 957 mm	16187	16187																		
Höhe 1217 mm	16180	16180																		
variable Höhe 1841 mm	16182	16182																		
<div>Schiebegriff</div> <div></div>	<div>in exklusivem Design aus Metall, hochwertig beschichtet.</div> <div>Farbe:</div> <table><tr><td>grau</td><td>13801</td><td>13801</td></tr><tr><td>blau</td><td>13802</td><td>13802</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13804</td><td>13804</td></tr></table> <div>Stückpreis</div> <div>Achtung: der Wagen wird bei 1 Griff ca. 50 mm breiter.</div>	grau	13801	13801	blau	13802	13802	gelb	13804	13804										
grau	13801	13801																		
blau	13802	13802																		
gelb	13804	13804																		
<div>Schiebegriff, kurz</div> <div></div>	<div>aus Metall, hochwertig beschichtet. Zur Montage vorne an einer Platte.</div> <div>Farbe:</div> <table><tr><td>grau</td><td>16166</td><td>16166</td></tr><tr><td>blau</td><td>16167</td><td>16167</td></tr></table> <div>Maße: 260 x 60 x 20 mm</div>	grau	16166	16166	blau	16167	16167													
grau	16166	16166																		
blau	16167	16167																		
<div>Schubladengriff</div> <div></div>	<div>ergonomische, formschöne Kunststoffgriffe in 6 unterschiedlichen Farben.</div> <div>Farbe:</div> <table><tr><td>grau</td><td>13161</td><td>13161</td></tr><tr><td>blau</td><td>13162</td><td>13162</td></tr><tr><td>rotviolett</td><td>13163</td><td>13163</td></tr><tr><td>gelb</td><td>13164</td><td>13164</td></tr><tr><td>türkis</td><td>13165</td><td>13165</td></tr><tr><td>weiß</td><td>13166</td><td>13166</td></tr></table>	grau	13161	13161	blau	13162	13162	rotviolett	13163	13163	gelb	13164	13164	türkis	13165	13165	weiß	13166	13166	
grau	13161	13161																		
blau	13162	13162																		
rotviolett	13163	13163																		
gelb	13164	13164																		
türkis	13165	13165																		
weiß	13166	13166																		
<div>Schubladengriff</div> <div></div>	<div>aus ABS-Kunststoff mit Beschriftungsfenster.</div> <div>Farbe:</div> <table><tr><td>grau</td><td>20061</td><td>20061</td></tr></table>	grau	20061	20061																
grau	20061	20061																		

Schubladen

Bitte für die oberste Schublade eine Schubladenabdeckplatte dazu bestellen. Siehe Seite 14.

für Wagen 45

Schublade 45



100 mm hoch, zur Montage unter einer Ablageplatte; mit schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.


Innenmaße swingo®:
378 x 384 x 85 mm (B x T x H)

Innenmaße swingo®-clinic:
356 x 396 x 85 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall
Griff	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
grau	13181	13891
blau	13182	13892
gelb	13184	13894
türkis	13185	13895

für Wagen 60

Schublade 60




100 mm hoch, mit schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.

Innenmaße swingo®:
529 x 384 x 85 mm (B x T x H)

Innenmaße swingo®-clinic:
506 x 396 x 85 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall
Griff	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
grau	13101	13211
blau	13102	13212
gelb	13104	13214
türkis	13105	13215

Schublade 45




200 mm hoch zur Montage unter einer Ablageplatte. Mit schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.

Innenmaße swingo®:
378 x 384 x 190 mm (B x T x H)

Innenmaße swingo®-clinic:
356 x 396 x 190 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall
Griff	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
grau	16001	16011
blau	16002	16012
gelb	16004	16014
türkis	16005	16015

Schublade 60




200 mm hoch, zur Montage unter einer Ablageplatte. Mit Reling, schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.

Innenmaße swingo®:
529 x 384 x 190 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		
Griff	Ref.-Nr.	
grau	13201	
blau	13202	
gelb	13204	
türkis	13205	

Schublade 60



200 mm hoch. Mit Reling, schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.

Innenmaße swingo®-clinic:
506 x 396 x 190 mm (B x T x H)

	swingo®-clinic Metall
Griff	Ref.-Nr.
grau	13221
blau	13222
gelb	13224
türkis	13225

Aufpreis für abschließbare Schubladen 45
100 mm hoch

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13994	15869

200 mm hoch

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13995	15869

Aufpreis für abschließbare Schubladen 60
100 mm hoch

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13962	15003

200 mm hoch

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13990	15003

Beheizbare Schublade / Schubladeneinsätze

für Wagen 45

Schubladen-einsatz 45

mit variabler Einteilung aus Kunststoff, transparent mit 1 Bahn und 4 Teilern, herausnehmbar und spülmaschinenfest.

für **swingo®**
Maße: 377 x 384 x 58 mm (B x T x H)

für **swingo®-clinic**
Maße: 356 x 389 x 58 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
16720		16722	

für Wagen 60

Schublade 60 beheizbar

100 mm hoch, 450 mm tief.

Maße der heizbaren Fläche:
526 x 381 x 37 mm (B x T x H)

für **swingo®**

swingo® Holz-Kunststoff	
Griff	Ref.-Nr.
grau	13401
blau	13402
gelb	13404
türkis	13405

Schubladen-einsatz 60

mit variabler Einteilung aus Kunststoff transparent mit 2 Bahnen und 6 Teilern, herausnehmbar und spülmaschinenfest.

für **swingo®**
Maße: 529 x 384 x 58 mm (B x T x H)

für **swingo®-clinic**
Maße: 506 x 389 x 58 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
16719		16721	

Verplombung / PC-Halter

Verplombung

für jeweils maximal 3 Schubladen; aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002). – ohne Plomben –

Maße: 57 x 95 x 260 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
13958		13958	

Plomben, Kunststoff, blau für Einmalbenutzung pro 100 Stück.

13998	13998
-------	-------

Verplombung

für jeweils maximal 3 Schubladen; aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002). – ohne Plomben –

Maße: 57 x 95 x 260 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
13958		13958	

Plomben, Kunststoff, blau für Einmalbenutzung pro 100 Stück.

13998	13998
-------	-------

PC-Halter

zur seitlichen Befestigung am Trägerprofil, rechts oder links. Höhenverstellbar, passend für alle gängigen Geräte inkl. Halteband.

Stahl pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006).

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
rechts 16339		16339	
links 16345		16345	

PC-Halter

zur seitlichen Befestigung am Trägerprofil, rechts oder links. Höhenverstellbar, passend für alle gängigen Geräte inkl. Halteband.

Stahl pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006).

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
rechts 16339		16339	
links 16345		16345	



Platten / Auszugsplatten

für Wagen 45

Platte, 300 mm tief



22 mm stark, **Breite 450 mm**.
Farbe für
swingo®: weiß
swingo®-clinic: grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
14692	14973

Platte, 450 mm tief



22 mm stark, **Breite 450 mm**.
Geeignet als **Schubladenabdeckplatte**
oder als **Ablageplatte**.
Farbe für
swingo®: weiß
swingo®-clinic: grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
14691	14693

Auszugsplatte 45



ca. 22 mm stark, für Keyboard,
Drucker oder andere Geräte; Griff
grau. Belastung max. 10 kg.
Maße: 450 x 450 mm (B x T)
Farbe für
swingo®-clinic: grauweiß RAL 9002

swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.
16712

für Wagen 60

Platte, 300 mm tief



22 mm stark, **Breite 600 mm**.
Farbe für
swingo®: weiß
swingo®-clinic: grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13905	13944

Platte, Edelstahl, 450 mm tief



mit Schwallkante, 25 mm stark, 7 mm
hoch. **Breite 600 mm**. Geeignet als
robuste **Arbeitsplatte** oder **Schub-**
ladenabdeckplatte. Unempfindliche,
pflegeleicht Leinenstruktur.
Stellfläche: 570 x 450 mm (B x T)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
14710	14710

Platte , 450 mm tief



22 mm stark, **Breite 600 mm**.
Geeignet als **Schubladenabdeckplatte**
oder als **Ablageplatte**.
Farbe für
swingo®: weiß
swingo®-clinic: grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13904	13942

Platte, 300 mm tief neigbar



22 mm stark, **Breite 600 mm**. In der
Neigung stufenlos verstellbar. Ideal
für Monitore oder als Schreibplatte.
Farbe für
swingo®: weiß
swingo®-clinic: grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13965	13946

Platte, 450 mm tief neigbar



22 mm stark, **Breite 600 mm**. In der
Neigung stufenlos verstellbar, max. Nei-
gungswinkel 20°. Ideal für Monitore oder
als Schreibplatte. Belastung max. 10 kg.
Farbe für
swingo®: weiß
swingo®-clinic: grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13964	13945

Auszugsplatte 60



ca. 32 mm stark, für Keyboard,
Drucker oder andere Geräte; Griff
grau. Belastung max. 10 kg.
Maße: 600 x 450 mm (B x T)
Farbe für
swingo®-clinic: grauweiß RAL 9002

swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.
16703

Auszugsplatte / Keyboardauszug / Antirutschmatte / Seitliche Platte

für Wagen 45

für Wagen 60

Keyboard-Auszug 45, mit Mousepad

nach vorne ausziehbar, mit Doppel-Arretierung; inkl. Rückwandverkleidung mit Kabeldurchführung zum Unterbau unter Schublade oder Ablageplatte. Mit Mousepad, nach rechts oder links ausziehbar; Aufkantung vorne ca. 60 mm hoch.

Außenmaße: 451 x 104 mm (B x H)
Innenmaße: 391 x 355 mm (B x T)

Farbe für swingo®: weiß

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16000	16715

Keyboard-Auszug 60, mit Mousepad

nach vorne ausziehbar, mit Doppel-Arretierung; inkl. Rückwandverkleidung mit Kabeldurchführung zum Unterbau unter Schublade oder Ablageplatte. Mit Mousepad, nach rechts oder links ausziehbar; Aufkantung vorne ca. 60 mm hoch.

Außenmaße: 601 x 104 mm (B x H)
Innenmaße: 541 x 355 mm (B x T)

Farbe für swingo®: weiß

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13976	16715

Antirutschmatte für Ablageplatten 45

aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA), transparent, geräuschkämmend.

Maße: 450 x 450 mm (B x T)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
15541	15541

Maße: 450 x 300 mm (B x T)

16161	16161
-------	-------

Antirutschmatte für Ablageplatten 60

aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA), transparent, geräuschkämmend.

Maße: 600 x 450 mm (B x T)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13950	13950

Maße: 600 x 300 mm (B x T)

13949	13949
-------	-------

Seitliche Platte

abklappbar, seitlich rechts oder links am Trägerprofil montiert. Tragkraft 15 kg.

Maße: 350 x 450 mm (B x T)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13996	13997

Seitliche Platte

abklappbar, seitlich rechts oder links am Trägerprofil montiert. Tragkraft 15 kg.

Maße: 350 x 450 mm (B x T)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13996	13997



Aufsatzplatte / Galerie / Monitorkonsolplatte / Halter für Monitorkonsolplatte

für Wagen 45

Aufsatzplatte 45



mit 10 mm Aufkantung, weißaluminium (RAL 9006) beschichtet.

Maße: 450 x 450 x 10 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13991	13991

für Wagen 60

Aufsatzplatte 60



mit 10 mm Aufkantung, weißaluminium (RAL 9006) beschichtet.

Maße: 600 x 450 x 10 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13992	13992

Galerie 60



zum Aufsetzen auf Ablageplatte, 450 mm tief. Stabiles Polystyrol, weiß, mit dreiseitigem Rand.

Innenmaße: 573 x 435 mm (B x T)

Höhe vorne: 10 mm

Höhe hinten: 55 mm

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13951	13951

Monitorkonsolplatte



Stahlblechplatte für Schwenkarm, weißaluminium (RAL 9006) beschichtet. Tragkraft 15 kg bei ausreichender Gegenlast im Geräteträger.


Maße: 350 x 350 x 10 mm (B x T x H)

Wir fertigen jedes Sondermaß nach Ihren Angaben. Fragen Sie uns!

- Auslaufmodell -

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13952	13952

Monitorkonsolplatte

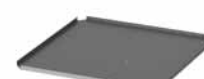

Stahlblechplatte für Schwenkarm, weißaluminium (RAL 9006) beschichtet. Tragkraft 15 kg bei ausreichender Gegenlast im Geräteträger.

Maße: 350 x 350 x 10 mm (B x T x H)

Wir fertigen jedes Sondermaß nach Ihren Angaben. Fragen Sie uns!

- Auslaufmodell -

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
13952	13952

Halter für Monitorkonsolplatte



drehbar. Zur Befestigung oben am Trägerprofil oder an einer Quertraverse, weißaluminium (RAL 9006).

Bitte Monitorkonsolplatte Ref.-Nr. 13952 dazu bestellen.

- Auslaufmodell -

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16359	16359

Halter für Monitorkonsolplatte



drehbar. Zur Befestigung oben am Trägerprofil oder an einer Quertraverse, weißaluminium (RAL 9006).

Bitte Monitorkonsolplatte Ref.-Nr. 13952 dazu bestellen.

- Auslaufmodell -

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16359	16359

Quertraversen / Reling / Trägerplatte für Steckdosenleiste

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse Ref.-Nr. 16555 bzw. 16554 unbedingt erforderlich.

für Wagen 45

Quertraverse 45 Metall



zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen. Bietet die Möglichkeit, vorne oder hinten z. B. eine Steckdosenleiste anzubringen. Aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).

Maße: 450 x 20 x 100 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16555	16555

für Wagen 60

Quertraverse 60 Metall



zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen. Bietet die Möglichkeit, vorne oder hinten eine Normprofilschiene oder Steckdosenleiste anzubringen. Aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).

Maße: 601 x 20 x 100 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16554	16554

Traverse 45 Holz-Kunststoff



als zusätzliche hintere Aufkantung der Platten oder Kippsicherung; **nicht zur Stabilisierung geeignet.**

weiß

Maße: 450 x 20 x 110 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	
Ref.-Nr.	
13984	

Traverse 60 Holz-Kunststoff



als zusätzliche, hintere Aufkantung der Platten oder Kippsicherung; **nicht zur Stabilisierung geeignet.**

weiß

Maße: 601 x 20 x 110 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	
Ref.-Nr.	
13983	

Reling 45



für Ablageplatte, 450 mm breit, 450 mm tief, weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet, Ø 8 mm. Montage am Trägerprofil.

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16646	16646

Reling 60



für Ablageplatte, 600 mm breit, 450 mm tief, weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet, Ø 8 mm. Montage am Trägerprofil.

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16648	16648

Trägerplatte 45



für Steckdosenleiste. Aus Metall, grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet; variabel montierbar hinten, innen oder unten. Durch die zurückgesetzte Montagemöglichkeit innerhalb der Profile, werden Stecker vor Beschädigung geschützt. **Nicht zur Wagenstabilisierung geeignet.**

Maße: 450 x 12 x 60 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16235	16235

Trägerplatte 60



für Steckdosenleiste. Aus Metall, grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet; variabel montierbar hinten, innen oder unten. Durch die zurückgesetzte Montagemöglichkeit innerhalb der Profile, werden Stecker vor Beschädigung geschützt. **Nicht zur Wagenstabilisierung geeignet.**

Maße: 600 x 12 x 60 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
16236	16236

Rückwand

für Wagen 60

Rückwand 60 für Basismodell



aus robustem Metall, weiß (RAL 9010) mit Einrastmechanismus.

Maße: 600 x 645 mm (B x H)

Bitte zusammen mit Wagen bestellen, da keine nachträgliche Montage möglich.

Rückwand in Sondermaßen auf Anfrage.

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
14714	14714

Zubehör für swingo® + swingo®-clinic 45 und 60

Abfallsammler / Abwurf-Schalen / TFT-Halter / Schwenkarm mit TFT-Halter

Die Referenznummern beinhalten das Zubehörteil komplett mit Befestigungsmaterial. Alle Zubehörteile lassen sich einfach an den Wagen **swingo®** und **swingo®-clinic** montieren.

Abfallsammler „tomo“



aus glattem und leicht zu reinigendem Kunststoff (100% Polypropylen), grau (RAL 7045), mit abnehmbarem, Deckel und mit Halterung. Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. B 450 x H 350 mm).

Maße:
315 x 180 x 315 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. **14097**

für Normschiene
Ref.-Nr. **14066**

Abfallsammler „tango“



praktische Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung. Gehäuse aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), inkl. Befestigungsmaterial.

Inhalt 8 Liter
Maße:
220 x 220 x 360 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. **16701**

Inhalt 20 Liter
Maße:
350 x 250 x 520 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. **16702**

Für die Befestigung am Wagen bitte zusätzlich 2 Normprofilschienen, Ref.-Nr. 13924 (Seite 21) bestellen.

Abwurf für Instrumente



mit Polypropylen-Schale weiß und mit Halterung, sterilisierfähig bis 134 °C.

Maße:
300 x 230 x 130 mm (B x T x H)
mit Schlitzdeckel
Ref.-Nr. **13912**

ohne Schlitzdeckel
Ref.-Nr. **13960**

Abwurf



Schale aus Edelstahl, mit Befestigungskloben Ø 320 mm.

Ref.-Nr. **13911**

TFT-Halter



für Flachbildschirm (VESA-Standard 75 und 100 mm). Montage an höhenverstellbarer Stange seitlich am Profil oder an einer Quertraverse. Bitte Quertraverse separat bestellen.

Traglast bis max. 15 kg
Ref.-Nr. **16346**

Schwenkarm mit TFT-Halter



mit TFT-Halter für Flachbildschirme (VESA-Standard 75 und 100 mm), RAL 9006 weißaluminium. Dreh- und neigbar. Arm schwenkbar, Schwenkbereich 300 mm.

Traglast bis max. 12 kg
Ref.-Nr. **16638**

„alegro“ Monitorträgersystem

Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-, neig- und schwenkbar. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption.

„alegro“ Halter für Monitor



auf fest eingestellter Edelstahl-Stange
im Trägerprofil befestigt. Höhe
ca. 400 mm oberhalb des Profils.

Traglast bis max. 12 kg
Ref.-Nr. **25023**

Traglast bis max. 18 kg
Ref.-Nr. **25049**

„alegro“ Halter für Doppelmonitoring



an Alu-Traverse zwischen zwei
Trägerprofilen für optimale Synchron-
einstellung. Kabelführung in den
Profilen.

für **Wagen 60**

Traglast bis max. 2 x 12 kg
Ref.-Nr. **25003**

Traglast bis max. 2 x 18 kg
Ref.-Nr. **25029**

„alegro“ Halter für Monitor



an Alu-Traverse zwischen zwei Träger-
profilen. Kabelführung in den Profilen.

für **Wagen 45/60**

Traglast bis max. 12 kg
Wagen 45 Ref.-Nr. **25064**
Wagen 60 Ref.-Nr. **25062**

Traglast bis max. 18 kg
Wagen 45 Ref.-Nr. **25055**
Wagen 60 Ref.-Nr. **25063**

„alegro“ Halter für Monitor auf Quertraverse



aus Metall, grauweiß, (RAL 9002).

für **Wagen 45**
Maße: 450 x 127 x 522 mm (B x T x H)

Traglast bis max. 12 kg
Ref.-Nr. **12251**

für **Wagen 60**
Maße: 600 x 127 x 522 mm (B x T x H)

Traglast bis max. 12 kg
Ref.-Nr. **12250**

„alegro“ Monitorhalter auf Schwenkarm



mit 1 Drehgelenk und integrierter
Kabelführung. Ausladung: 300 mm.

Traglast bis max. 12 kg
Ref.-Nr. **25024**

Traglast bis max. 18 kg
Ref.-Nr. **25050**

„alegro“ Monitorhalter auf Schwenkarm



mit 2 Drehgelenken und integrierter
Kabelführung. Ausladung: 300 mm.

Traglast bis max. 12 kg
Ref.-Nr. **25020**

Traglast bis max. 18 kg
Ref.-Nr. **25046**

„alegro“ Monitorhalter auf Gelenkarm



mit Adapterwinkel außen oder innen
am Trägerprofil und integrierter
Kabelführung. Ausladung: 300 mm.

Traglast bis max. 12 kg
Ref.-Nr. **25013**

Traglast bis max. 18 kg
Ref.-Nr. **25039**

„alegro“ Monitorhalter auf Doppelgelenkarm



mit Adapterwinkel außen oder innen
am Trägerprofil und integrierter
Kabelführung. Ausladung: 2 x 150 mm.

Traglast bis max. 12 kg
Ref.-Nr. **25014**

Traglast bis max. 18 kg
Ref.-Nr. **25040**

Verbandmittelspender / Injektionsset / KOMBI-Set

Wenn Sie mehr über unsere Spender-Serien COMPACT und PicBox[®] wissen möchten, dann fordern Sie bitte unseren Prospekt und Preisliste Spendersystemen + Entsorgungsboxen an.

Verbandmittel-spender COMPACT



Qualitativ hochwertiges Gehäuse, weiß kunststoffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben, griff-technisch optimale Einteilung; zum Verschrauben zwischen den Profilen.

Maße:
600 x 220 x 450 mm (B x T x H)
Ref.-Nr. 13913

Injektionsset COMPACT



Qualitativ hochwertiges Gehäuse, weiß kunststoffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben, griff-technisch optimale Einteilung; zum Verschrauben zwischen den Profilen.

Maße:
600 x 220 x 450 mm (B x T x H)
Ref.-Nr. 13914

Injektionsset PicBox[®]



Der Spender nach First-in/first-out Prinzip und Staubschutz nach DIN 58953 Grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten. Die Schütten werden von oben befüllt, das Material unten entnommen. Jede Schütte mit Staubschutzdeckel. Bestehend aus Spritzenspender mit 3 Schütten und Kanülenspender mit 5 Schütten; zum Verschrauben zwischen den Profilen.

Maße:
600 x 200 x 410 mm (B x T x H)
Ref.-Nr. 13915

KOMBI-Set



für Blutentnahme und Injektion. Bestehend aus Tupferspender TAKEFIX und Tupferbefeuchter TIPPFIX sowie Zusatzbehälter aus grauweißem, unzerbrechlichen Kunststoff.

Empfehlenswert als Anbauteil für das Injektionsset.

Maße:
120 x 230 x 265 mm (B x T x H)
Ref.-Nr. 13916

Diverse Zubehörartikel

Standsicherung



Set mit 4 Standsicherungsecken aus schwarzem Zellgummi, einseitig klebend. Zur Sicherung der Geräte, wenn der Wagen bewegt wird.

Maße:
40 x 40 x 5 mm (B x T x H)
Ref.-Nr. 17222

Universalhalter Snap



für Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues oder Wischtüchern. Ein federnder Spannschieber hält Boxen aller Art bis 1 kg für Einhandbedienung bereit. Mit Halterung für Trägerprofil.

Ref.-Nr. 15606

Halter für Spenderboxen



aus Edelstahl, gebürstet. Passend für 1 bis 4 gängige Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues, mit Befestigungsmaterial für **swingo** oder **swingo-clinic**.

Halter 1-fach für (für 1 Box)
Innenmaße:
142 x 94 x 250 mm (B x T x H)
Ref.-Nr. 13026

Halter 3-fach (für 3 Boxen)
Innenmaße:
253 x 94 x 394 mm (B x T x H)
Ref.-Nr. 13027

Halter 4-fach (für 4 Boxen)
Innenmaße:
253 x 94 x 525 mm (B x T x H)
Ref.-Nr. 05071

NEU

Kanülensammler Schluckfix



Einmalbehälter zur Aufnahme von ca. 500 gebrauchten Kanülen. Aus schwarzem Recycle-Kunststoff.

Maße:
55 x 100 x 170 mm (B x T x H)

Schluckfix-Set
mit 20 Boxen, inkl. Halterung

Ref.-Nr. 13917

Schluckfix Originalkarton
mit 100 Boxen, ohne Halterung

Ref.-Nr. 09490
separat für Schluckfix
Ref.-Nr. 13918

Halterung

Sensor-Spender



aus Aluminium natur eloxiert, für 1 Liter Standardflasche mit Seifen- und Desinfektionsmitteln. Halterung aus Edelstahl, rechts oder links montierbar. Bei Bestellung bitte angeben.

Maße:
95 x 210 x 290 mm (B x T x H)

Sensor-Spender
Ref.-Nr. 16204

separat, herausnehmbar für Ref.-Nr. 16204
Ref.-Nr. 16256

Abtropfschale

Seifen- und Desinfektionsmittelspender














Befestigung rechts oder links möglich. Aus Aluminium natur eloxiert. Für Standardflaschen mit Inhalt 1 Liter.

Maße:
95 x 185 x 290 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 16087

separat, herausnehmbar für Ref.-Nr. 16087
Ref.-Nr. 16256

Abtropfschale

<p>Entsorgungsbox „Medi-Müll“ à 1,5 Liter</p> 	<p>aus sonnengelbem Polypropylen mit HAEBERLE-grünem Deckel. Bietet 3 praktische Abstreifhilfen für alle Kanülentypen, auch Vacutainer. Ideal geeignet für Skalpelle, Pipetten, Glasbruch, Tupfer usw.</p> <p>Höhe 152 mm Ø des Deckels 143 mm, Ø des Bodens 108 mm</p> <p>Set mit 20 Boxen und Halterung.</p> <p>Ref.-Nr. 13919</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	<p>„CUPFIX“ Ampullenöffner</p>  <p>Halterung</p>	<p>grauweiß, Gehäuse Kunststoff, Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar. Diamantfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert.</p> <p>Maße: 70 x 150 x 200 mm (B x T x H)</p> <p>Ref.-Nr. 13921</p> <p>Ersatz-Diamantfeile für „CUPFIX“ Ref.-Nr. 04663</p> <p>separat für „CUPFIX“ Ref.-Nr. 13922</p>
<p>„Medi-Müll“</p> <p>Halterung</p>	<p>Karton mit 100 Boxen, ohne Halterung</p> <p>Ref.-Nr. 16653</p> <p>separat für „Medi-Müll“ Ref.-Nr. 13920</p>	<p>Reanimationsbrett mit Halterung</p> 	<p>aus robustem blauen Polyäthylen, sehr stabil und trotzdem leicht (2 kg). Belastung bis 150 kg. Halterung aus Edelstahl. Anatomisch geformte Kopfmulde für richtige Positionierung bei Herzdruckmassage. Verwendbar für Wagenrückwände von min. 380 mm Höhe.</p> <p>Maße: 600 x 420 x 60 mm (B x T x H)</p> <p>Ref.-Nr. 17370</p>
<p>Armauflage</p> 	<p>schwarz, gepolstert mit Integral-schaum, mit 2 Befestigungskloben, besonders stabil.</p> <p>Ref.-Nr. 13923</p>	<p>Normprofilschiene</p> 	<p>zur seitlichen Befestigung. Aus Edelstahl mit 2 Befestigungspunkten.</p> <p>Länge 420 mm</p> <p>Ref.-Nr. 13924</p>
<p>Katheter-Köcher</p> 	<p>aus Edelstahl, 3-fach unterteilt; zum Einhängen in Normprofilschiene.</p> <p>Maße: 160 x 80 x 570 mm (B x T x H)</p> <p>Ref.-Nr. 13959</p> <p>Bitte Normprofilschiene Ref.-Nr. 13924 zur seitl. Befestigung dazu bestellen.</p>	<p>Normprofilschiene</p> 	<p>zur rückseitigen Befestigung. Aus Edelstahl mit 2 Befestigungspunkten.</p> <p>Länge 440 mm</p> <p>Ref.-Nr. 13953</p>
<p>Halterung</p> 	<p>für 2 L Sauerstoff-Flasche, silber-aluminium.</p> <p>Oberer Haltering Ø 102 mm, unterer Haltering Ø 84 mm.</p> <p>Ref.-Nr. 13956</p>	<p>Halterung</p> 	<p>für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter mit Flaschendurchmesser 145 mm; inkl. oberem Haltebügel mit flexiblem Band.</p> <p>Ref.-Nr. 16322</p> <p>Zusätzlicher Haltebügel mit flexiblem Band, separat</p> <p>Ref.-Nr. 16324</p>
<p>Infusions-flaschenhalter</p> 	<p>verchromt, mit 4 Haken, Ø 25 mm, für Einhandbedienung.</p> <p>Ref.-Nr. 13927</p>	<p>Endoskophalterung/ Plexiglasschutzrohr</p> 	<p>Universal-Endoskophalterung aus Plexiglas mit mehreren Ausschnitten für Endoskope und Zubehör. Höhenverstellbare Stange zur Einhandbedienung.</p> <p>Ref.-Nr. 13979</p> <p>Plexiglasschutzrohr, 1200 mm lang unten offen. Innen Ø 3,2 cm. Außen Ø 40 mm mit Halteklammern für swingo®</p> <p>Ref.-Nr. 13977</p> <p>dto., unten geschlossen, für Desinfektionslösung</p> <p>Ref.-Nr. 13978</p>



grau, Ausladung ca. 950 mm. Rohre aus silberfarbenem Aluminium mit Einhand-Druckknopf-Verstellung. 2 Gelenke, 2 Kabelführungselemente, inkl. Befestigungskloben.

Ref.-Nr. **13926**



mit Flexwelle. 2 Gelenke aus Kunststoff, Rohre aus silberfarbenem Aluminium, Flexwelle verchromt, inkl. Befestigungskloben.

Ref.-Nr. **16651**



aus weißem Kunststoff.

Maße:
34 x 66 x 70 mm (w x d x h)

Ref.-Nr. **15171**



aus grauem Kunststoff. Zur Befestigung in den Profilmuten.

Ref.-Nr. **19015**



zur Diebstahlsicherung von Notebooks. Befestigung am Trägerprofil. Ohne Schloss.

Ref.-Nr. **16424**



aus Kunststoff (POM = Polyoxymethylen).

Maße:
25 x 6 x 40 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. **15390**



LED-Untersuchungsleuchte mit federentlastetem Gelenkarm. Leuchtenkopf mit doppelwandigem Gehäuse zur optimalen Kühlung.

Lichtleistung: **15.000 Lux / 0,5 m**

Anschlussspannung: 100 - 240 V; 50/60 Hz

Ref.-Nr. **05522**

Befestigungskloben für **swingo®**

Ref.-Nr. **14659**

Weitere Halogen- und LED-Leuchten finden Sie in unserem Leuchtenprospekt.



zum universellen Einsatz für alle Anbauteile an **swingo®** und **swingo®-clinic**. Geeignet für die Aufnahme von Rundrohren Ø 10 mm und Ø 16 mm.

Ref.-Nr. **13929**



4 Schutzkontakt-dosen, grüner 2-poliger Schalter, hellgraues Kabel, 3 m lang mit angegossenem Schuko-stecker, Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert mit 2 grauen Kunststoff-Befestigungswinkeln.

Maße:
269 x 44 x 44 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. **21693**

Weitere Steckdosenleisten finden Sie im separaten Elektro-Zubehör-Programm.

Elektro-Zubehör


Passend zu den Wagensystemen bieten wir Ihnen ein umfassendes Elektro-Programm in speziellen Ländervarianten an. Fragen Sie uns!

- Das Programm beinhaltet:
- Standard-Steckdosenleisten
 - Modulare Steckdosenleisten
 - Zentrale Ein- / Ausschalter
 - Trenntransformatoren (Stand- und Unterbau-Modelle)
 - Potentialausgleich-System MultiContact POAG
 - Elektro-Verbindungstechnik nach IEC 320 C13/C14
 - Kabelmanagement und Aussteckschutz

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 20235235



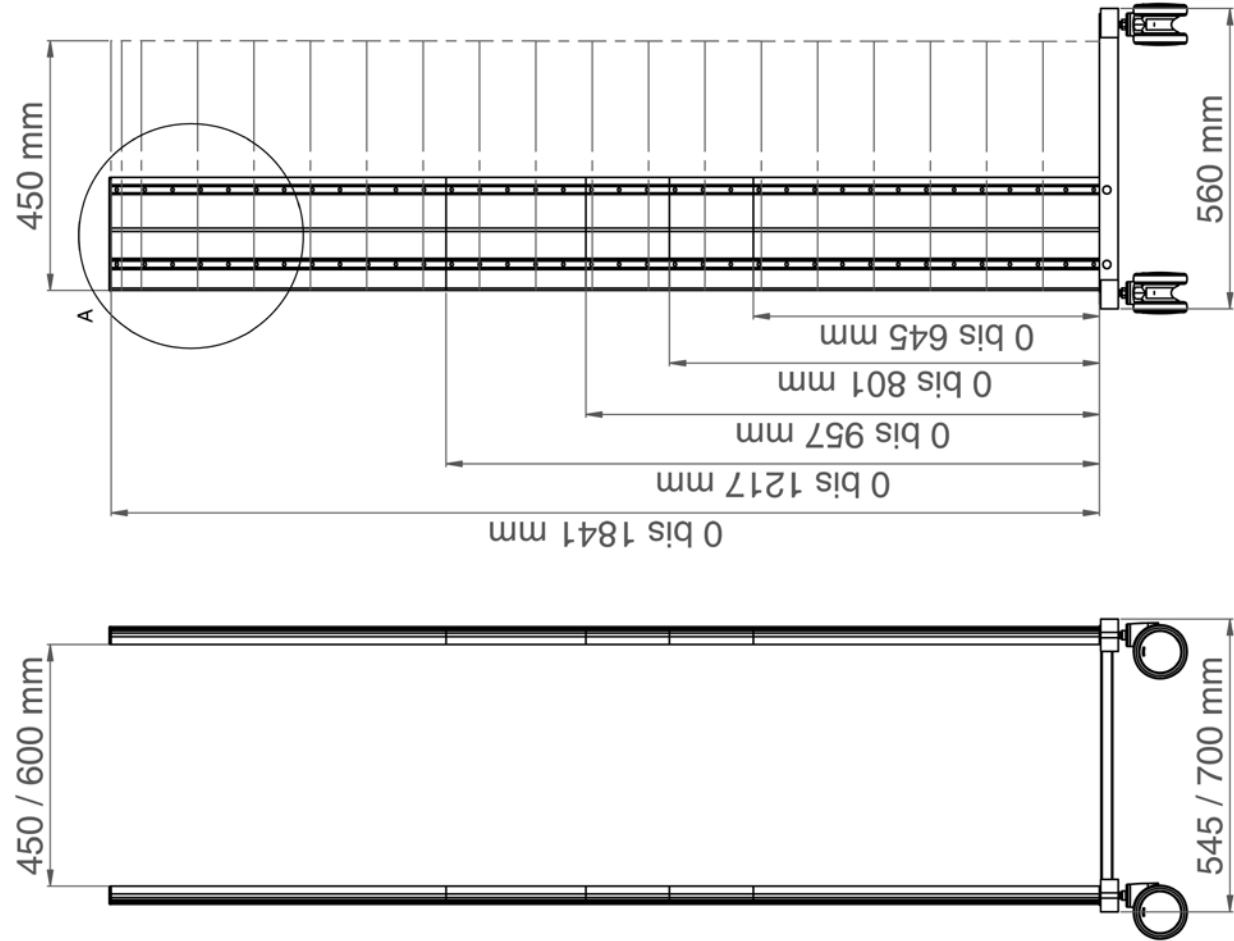

swingo

Holz-Kunststoff




swingo-clinic

Metall




Beispiel Montage im Raster

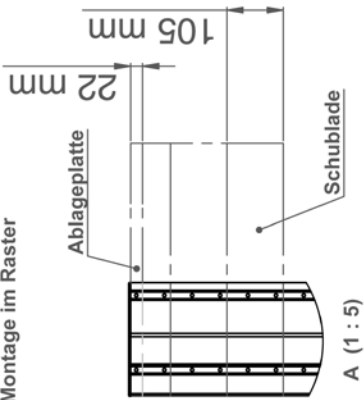

Farbe der Dekorstreifen
und Schiebegriffe



Profilhöhe

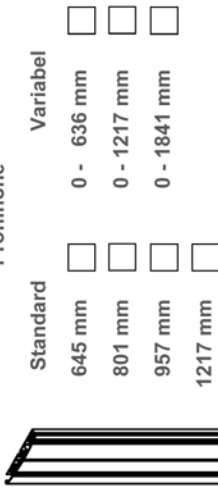

(Raster = 52 mm)

Bei einer Profilhöhe ab 957 mm
ist aus Stabilitätsgründen eine
Quertraverse Ref.-Nr. 16555
bzw. 16554 erforderlich.

Fahrgestelle / Rollen / Traglast:



Wagen

45

60

Rollen Ø100
(swingo bis 120 kg)
(swingo-clinic bis 130 kg)

mit 2
Fest-
stellern

45

60



Rollen Ø125, 2 feststellbar
(swingo bis 120 kg)
(swingo-clinic bis 130 kg)

45

60



Rollen Ø150, 2 feststellbar
(swingo bis 120 kg)
(swingo-clinic bis 250 kg)

45

60



Rollen Ø100
mit Bodenplatte 300 mm tief
(swingo bis 120 kg)
(swingo-clinic bis 130 kg)

45

60

mit 2
Fest-
stellern

45

60



Rollen Ø150; 2 feststellbar
nach hinten verlängert,
elektrisch leitfähig
(swingo bis 120 kg)
(swingo-clinic bis 250 kg)

45

60


4 elektr. leitfähige Rollen

60

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

Unsere vielseitige Produktpalette

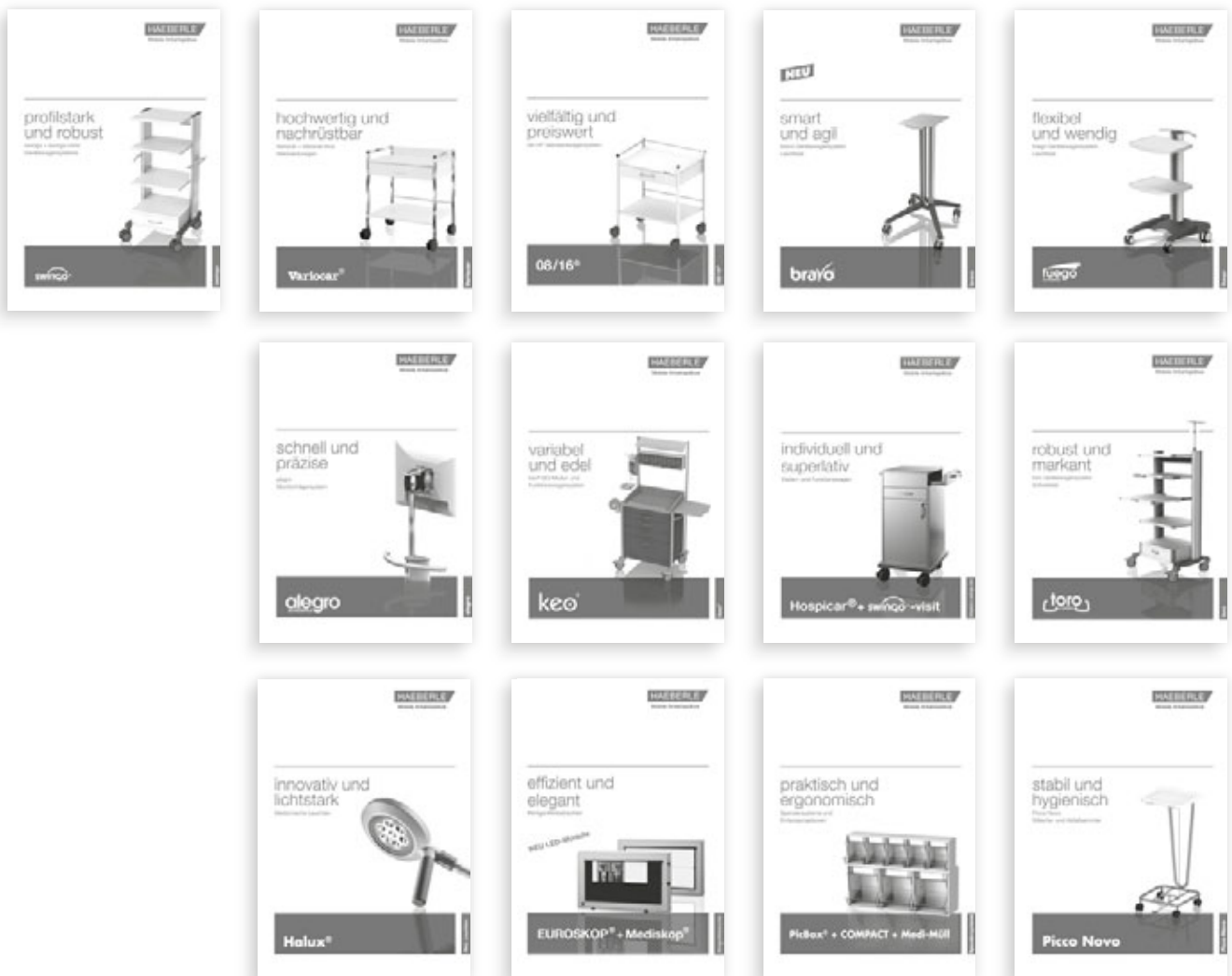

WAARDENBURG
MEDICAL

www.waardenburgmedical.com
info@waardenburgmedical.com

Dorpsstraat 8a
4181 BN Waardenburg

+31(0) 418 651 078
+31(0) 61066 2894

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart
Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 78314-0
Telefax +49 (0) 711 78314-77
info@haeberle-med.de
www.haerberle-med.de

Version 07/17

